



## **Aide au transfert de lit en solo**



**VY428/VY438/VY428N/VY438N**  
**Instructions de fixation et  
d'entretien**

## INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi l'aide de transfert de lit Aidapt Solo. L'aide au transfert de lit est fabriquée à partir des meilleurs matériaux et composants disponibles, une fois installé et utilisé correctement, il est conçu pour offrir de nombreuses années de service fiable et sans problèmes. L'aide au transfert de lit solo peut être installée sur des lits simples, doubles, petite taille et grande taille . Existe en deux finitions; époxy blanc et chrome. L'aide au transfert de lit en solo n'est pas conçue pour empêcher les utilisateurs de tomber du lit.

**PLEASE NOTE: VY428/VY428N IS THE SOLO BED TRANSFER AID WITHOUT ST**

**NB. Cet équipement doit être installé par une personne compétente et une évaluation des risques entreprise quant à l'adéquation de l'aide au transfert de lit pour l'utilisateur particulier et au lit de l'utilisateur.**

**VY428/VY438**

**127 kg Limite de poids**

**VY428N/VY438N**

**159 kg Limite de poids**


**Remarque: Ne dépassez pas la limite de poids indiquée - cela pourrait mettre l'utilisateur en danger.**

## AVANT UTILISATION

- Retirez soigneusement tous les emballages. Évitez d'utiliser des couteaux ou d'autres instruments tranchants, cela pourrait endommager la surface du produit.
- Recherchez des dommages visibles sur le produit. Si vous constatez un dommage ou suspectez un défaut, n'utilisez pas votre produit car cela pourrait compromettre votre sécurité, contactez votre fournisseur pour obtenir de l'aide

## ASSEMBLAGE ET INSTRUCTIONS


1. Votre aide au transfert du lit est expédiée prête à être utilisée avec sa poignée à son réglage le plus bas (VY428 & VY438).
2. Pour installer, retirez le matelas du lit où l'aide au transfert de lit doit être installée et vérifiez s'il y a des obstructions.
3. Placez l'aide de transfert de lit sur la base du lit avec la grande base plate sur le cadre du lit et la poignée en boucle tournée vers le haut avec le côté du lit.
4. Prenez la plus courte des deux sangles et attachez-la au niveau de la barre transversale horizontale, le plus court avec le côté du lit en alimentant la boucle femelle à travers la grande boucle en plastique et en tirant bien (voir fig. 1).

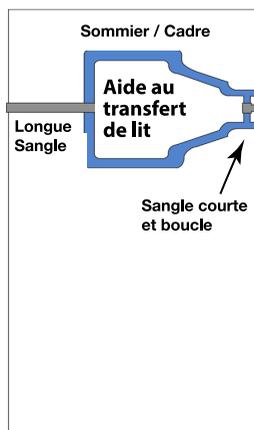

5. Prenez la plus longue des deux sangles, retirez la boucle mâle en prenant soin de noter la méthode correcte pour la remise en place, puis enroulez la sangle la plus longue autour de la barre transversale horizontale située au centre du cadre du lit et tirez fort (voir fig. 2).
6. Rattachez la boucle mâle à la plus longue des sangles et faites passer la boucle et la sangle sous la base du lit (voir fig. 3).
7. Déplacez l'aide de transfert de lit de haut en bas pour trouver la meilleure position pour le l'utilisateur afin de se soulever en toute sécurité.
8. Assurez-vous que le cadre de l'aide au transfert de lit est bien à l'arrière du lit et que les deux pieds noirs à la base de l'appareil touchent le bord du lit.
9. Attachez les deux boucles et serrez la sangle en veillant à ce que l'aide au transfert de lit soit est sécurisé dans sa position et la boucle est bien fixée. Éliminez tout excès sangle pour éviter les voyages.
10. Remplacez le matelas en veillant à ce que la poignée de l'aide au transfert du lit soit pointée. l'appareil est dans la position optimale pour répondre aux besoins du client.
11. Si nécessaire, un deuxième jeu de sangles peut être installé (VS247).

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR (VY428 & VY438)

La hauteur de la poignée de l'aide au transfert de lit peut être ajustée en fonction de l'exigence. Pour régler la poignée, retirez simplement les deux clips électroniques gris de la base et soulever la poignée à la hauteur requise en veillant à ne pas dépasser le dernier trou pré-perforé à la base du cadre. Une fois la hauteur désirée atteinte, réinsérez les clips électroniques dans les trous pré-perforés en veillant à ce que les deux clips passent complètement à travers le cadre du tube, le tube intérieur doit sortir de l'autre côté afin q'il soit en place comme indiqué ci-dessous. Correct Incorrect.

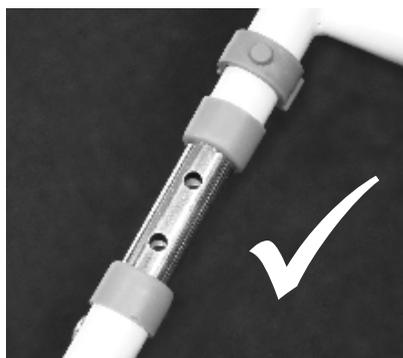

**CORRECT**



**INCORRECT**

Vérifiez que l'appareil est correctement réglé en tirant les poignées vers le haut, s'il n'y a pas mouvement, le réglage en hauteur a été effectué correctement.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

## NETTOYAGE

L'aide de transfert Solo Bed Transfer Aid doit être nettoyée à l'aide d'un nettoyant non abrasif ou d'un détergent doux avec un chiffon doux. Utilisez uniquement un détergent doux ou un désinfectant; n'utilisez jamais de nettoyant abrasif. Ne pas dépasser 50°C. Assurez-vous toujours d'essuyer tout le matériel et de traiter les joints avec de l'eau ou agent dispersant, par ex. WD40.

## RÉÉDITER

Si vous n'avez pas utilisé ce produit depuis longtemps, vérifiez soigneusement tous les composants.

Pour votre sécurité. Ceci comprend:

- Serrage de tous les écrous / boulons / roulettes et autres composants à visser / boulonner / enfoncer. Rembourrage (le cas échéant) pour la sécurité, les fentes, les agrafes exposées, etc.
- Rectitude et intégrité de tous les tubes et soudures
- En cas de doute, veuillez ne pas utiliser le produit, prenez conseil auprès d'un professionnel.
- Une évaluation des risques doit être entreprise pour déterminer si le lit convient ou non.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Les poignées d'aide au transfert de lit ont été conçues pour répondre aux dernières directives de la MHRA, vous devez vous assurer qu'il n'y a aucun risque pour l'utilisateur ou le soignant après l'installation et le service de l'aide au transfert de lit avec ou sans sangle.

Ne laissez pas d'enfants ni de personnes non autorisées jouer avec l'appareil ou utiliser le lit, ou aider au transfert sans surveillance adéquate.

## SOIN ET ENTRETIEN

Faites une vérification de sécurité du produit à intervalles réguliers ou si vous avez le moindre doute.

**Aidapt Bathrooms Ltd.**  
**Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPALISSE, France**  
**Tel: 05 63 48 15 1 Fax: 05 63 37 61**  
**Email: Altai Europe@orange.fr**