




Foot Cleaner with Pumice

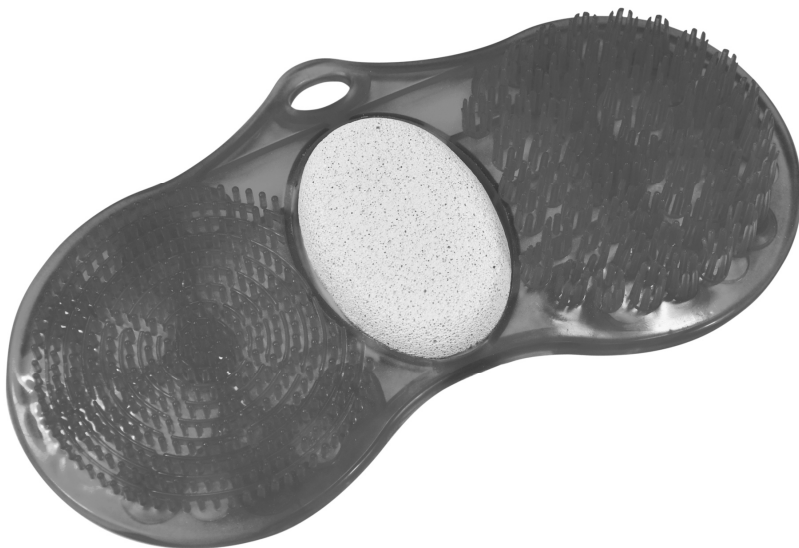

VM972

Usage and Maintenance Instructions

INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Foot Cleaner with Pumice from Aidapt. The Foot Cleaner is manufactured from the finest materials available. When used correctly it is designed to give many years of reliable, trouble-free service.

BEFORE USE

Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the product.

Please examine your product for any visible damage before using/installing. If you see any damage or suspect a fault, please do not use, but contact your supplier.

INTENDED USE

The Foot Cleaner with Pumice is ideal for people who have limited mobility, enabling users to easily clean their feet without bending. The suction caps on its underside help to keep it safely secured to the bath during use. It can be used with any type of liquid soap and the centre pumice gently exfoliates and removes hard skin on your feet.

INSTRUCTIONS FOR USE

We recommend that you use the Foot Cleaner in the bath or shower, after the feet have been well soaked, for best results.

NB. Ensure that you are balanced by holding onto a secure, fixed rail or surface, if necessary, during use.

- Ensure the surface you intend to use the Foot Cleaner on is free from oily residue, which can prevent the suction cup from gripping.
- Position the Foot Cleaner and push down a little until the suction cups have gripped the surface.
- Raise one foot and move it over the brush or pumice as required. Swap and repeat with the other foot.

CLEANING

Clean your Foot Cleaner using a non-abrasive cleaner or mild detergent with a soft cloth. Abrasive cleaners e.g. AJAX and/ or abrasive cleaning pads may damage the product beyond repair and should not be used. Always ensure that you wipe dry the equipment after cleaning.

REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

NB. If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.


Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk
Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk



Brosse pour les Pieds avec Pierre Ponce

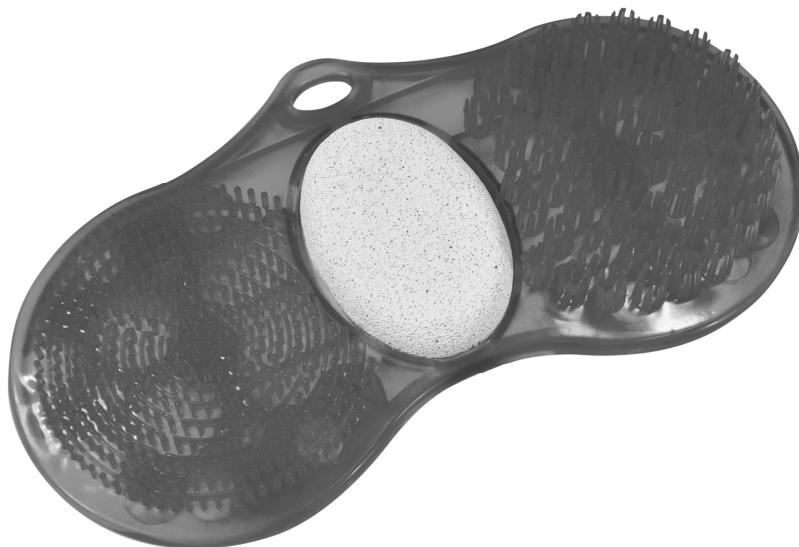

VM972

Notice d'Utilisation et d'Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté la brosse pour les pieds avec pierre ponce Aidapt. Celle-ci est fabriquée avec les meilleurs matériaux disponibles. Si vous l'utilisez correctement, elle vous rendra service pendant de nombreuses années.

AVANT UTILISATION

- Sortez le produit de l'emballage. N'utilisez pas de couteau, cutter ou autre objet tranchant car cela pourrait endommager le produit.
- Vérifiez que le produit est en bon état. En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

La brosse pour pieds avec pierre ponce est idéale pour les personnes à mobilité réduite et permet aux utilisateurs de se nettoyer facilement les pieds sans avoir à se pencher. Les ventouses situées au-dessous de la brosse aident à sécuriser la brosse dans la baignoire pendant l'utilisation. Elle peut être utilisée avec n'importe quel type de savon liquide et la pierre ponce située au centre exfolie doucement les callosités du pied.

CONSEILS D'UTILISATION

Pour un meilleur résultat, nous vous recommandons d'utiliser la brosse de pieds dans la baignoire ou la douche, après vous être mouillé les pieds.

Si nécessaire, et afin de ne pas perdre l'équilibre, tenez vous bien à une barre fixée au mur pendant l'utilisation.

- Vérifiez qu'il n'y a pas de dépôt huileux ou glissant sur la surface sur laquelle vous allez poser votre brosse pour les pieds, ce qui entraverait le bon fonctionnement des ventouses.
- Positionnez correctement la brosse pour les pieds et appuyez vers le bas jusqu'à ce que les ventouses adhèrent bien à la surface de la baignoire ou de la douche.
- Levez un pied et mettez-le sur la brosse ou la pierre ponce selon le besoin. Changez de pied puis faites de même.

NETTOYAGE

Lavez votre brosse pour les pieds avec un savon doux. Vous ne devez en aucun cas utiliser de détergent abrasif car cela endommagerait votre brosse qui ne pourrait alors plus être utilisée. Séchez-la bien.

RÉUTILISATION

Si vous n'avez pas utilisé ce produit pendant longtemps, vérifiez qu'il est en bon état.

En cas de doute, ne l'utilisez pas ni ne le prêtez pas.

ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement l'état de votre produit.

INFORMATIONS IMPORTANTES


Les informations données dans cette notice d'utilisation ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un quelconque contrat ou engagement par Aidapt Bathrooms Limited Aidapt Wales ni ses agents ou filiales et aucune garantie n'est donnée concernant ces informations.

Nous vous remercions de faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)
Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France
Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Fußreiniger mit Bimsstein

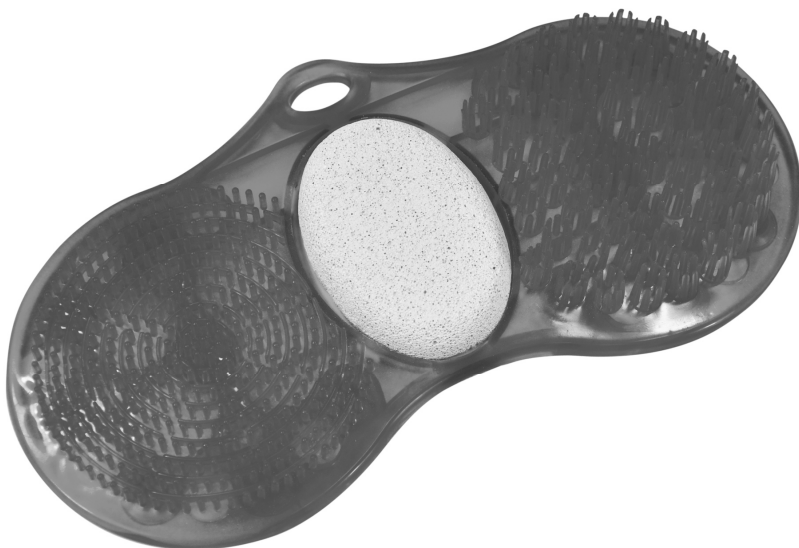

VM972

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb dieses Fußreinigers mit Bimsstein von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

VOR GEBRAUCH

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.

Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Fußreiniger mit Bimsstein ist ideal für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit. Er hilft dem/der Benutzer/in, die Füße zu reinigen, ohne sich nach unten beugen zu müssen. Die Saugköpfe an seiner Unterseite helfen, ihn während seines Gebrauchs sicher in Position zu halten. Er kann mit jeder Art flüssiger Seife benutzt werden. Der Bimsstein in der Mitte des Geräts kann zur Entfernung von Hornhaut an Ihren Füßen benutzt werden.

GEBRAUCH

Für beste Ergebnisse empfehlen wir, dass Sie den Fußreiniger entweder in der Badewanne oder in der Dusche verwenden, nachdem Sie die Füße haben einweichen lassen.

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie bei Gebrauch des Fußreinigers stabil stehen. Halten Sie sich dazu falls nötig an einem installierten Haltegriff oder einer anderen festen Oberfläche fest.

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie den Fußreiniger anbringen möchten, frei von öligen Rückständen ist. Diese können die Funktion der Saugköpfe beeinträchtigen.
- Bringen Sie den Fußreiniger in Position und drücken Sie ihn nach unten, damit sich die Saugköpfe festsaugen.
- Heben Sie einen Fuß an und bewegen Sie ihn wie gewünscht über die Bürste oder den Bimsstein. Wiederholen Sie dies mit dem anderen Fuß.

REINIGUNG

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem milden Waschmittel und mit einem weichen Tuch; benutzen Sie keinesfalls einen scheuernden Reiniger oder scheuernde Schwämme, da diese das Produkt irreparabel beschädigen könnten. Nach der Reinigung stets trocken wischen.

NEUVERGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

Im Zweifelsfall bitte nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

Altai Germany (Altai Europe Ltd.)
Reklamationen & Rücksendungen an:
W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve
Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815