



Tabouret de douche - mode d'emploi

Item no.
Art. Nr.
Varenr.
Codice

302050



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex.dk

Tabouret de douche 302050

Description et utilisation prévue

Le banc de douche (img. A) est utilisé pour faciliter l'assise dans la douche. Le banc a un cadre en aluminium avec des pieds réglables en hauteur et un siège en plastique blanc.

Informations de sécurité importantes

Utilisez l'appareil uniquement dans le but prévu. Ne montez pas sur l'appareil. Assurez-vous que toutes les jambes ont la même hauteur. Utilisez uniquement en bon état technique et sur une surface plane et lisse. Vérifiez toujours la stabilité de l'appareil avant utilisation.


Description de l'assemblage et de l'utilisation

L'appareil doit être assemblé en montant les deux pieds croisés sur le côté inférieur du banc. Montez la jambe en premier avec un côté plat au milieu et à la baisse. Ensuite, assurez-vous que le dernier bras croisé s'ajuste sur le côté plat (img. B) et serrez toutes les vis. Ajustez la hauteur à la taille de l'utilisateur en tirant sur les pieds et en appuyant sur les boutons épingles de chaque pied à la hauteur souhaitée. Assurez-vous que les broches sont bien en place sur chaque jambe pour verrouiller la position et que toutes les jambes sont réglées à la même hauteur (img. C).

Nettoyage et entretien

La saleté normale sur les pièces métalliques et plastiques peut être enlevée avec des agents de nettoyage standard et un chiffon doux. N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs.

Données techniques	
Dimension	50 x 30 cm
Hauteur du siège réglable	38 - 50 cm
Poids maximum supporté	115 kg
Poids du produit	1,79 kg

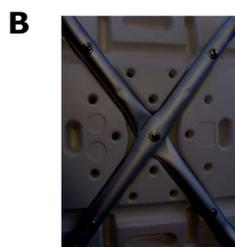

Déclaration de conformité (CE)

La société Mobilex A / S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danemark, déclare que:

Tabouret de douche Mobilex
N ° d'article 302050

est conçu et fabriqué conformément à la documentation technique qui satisfait aux exigences de base suivantes:

Directive Directive du Conseil de l'UE 93/42 / CEE sur les équipements médicaux

Conditions de garantie

Mobilex A / S offre 24 mois de garantie pour les dommages causés par des erreurs de production. La garantie n'est pas valable en cas d'utilisation non conforme du produit. Les pièces sujettes à une usure normale ne sont pas couvertes par la garantie, sauf si l'usure est causée par une erreur de fabrication. En cas de dommage, veuillez en informer votre revendeur. La garantie ne couvre pas les frais de transport, les blessures ou autres dommages éventuellement liés à un dysfonctionnement du produit.

Lars Nygaard
Managing Director
Mobilex A/S

Skanderborg, 22-03-2018