




## **Preparation Board**

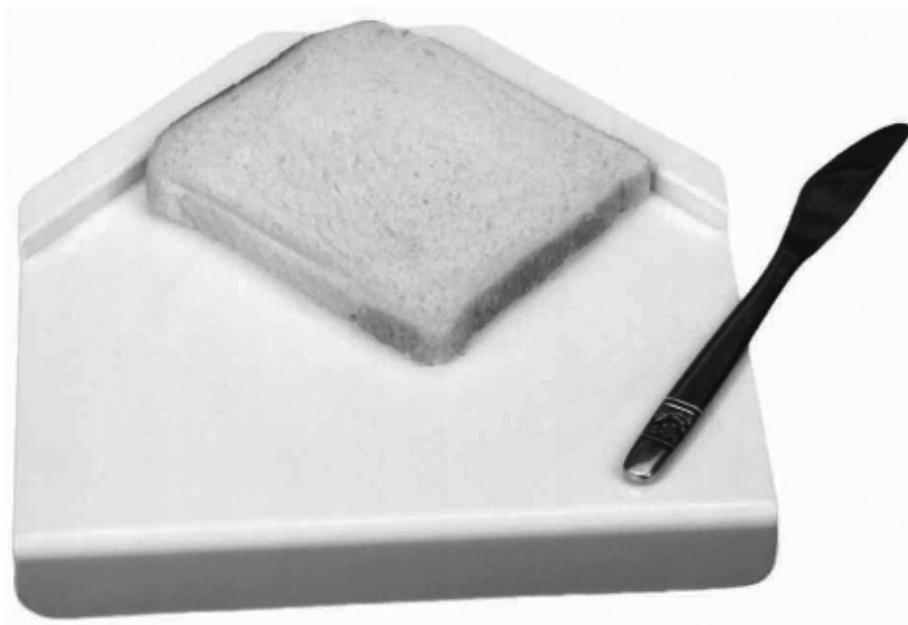

**VM982**

## **Usage and Maintenance Instructions**

## INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Preparation Board from Aidapt. The Preparation Board is manufactured from the finest materials and components available. When used correctly it is designed to give many years of reliable trouble-free service.

## BEFORE USE

Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.

Check the product for any visible damage. If you see any damage or suspect a fault, do not use your product, but contact your supplier for support.

## INTENDED USE

Food preparation board for those with limited hand use.

## INSTRUCTIONS FOR USE

The Preparation Board is simple to use:

- Position the Preparation Board onto the work surface with the straight lip over the edge of the work surface to hold the Preparation Board in place.
- The Preparation Board features non-slip feet, which will help to keep it in place.
- The rear upstand of the Preparation Board will hold bread and other food steady for buttering and cutting, etc.

## CLEANING

Clean your Preparation Board using a non-abrasive cleaner or mild detergent with a soft cloth. Abrasive cleaners e.g. AJAX and/or abrasive cleaning pads may damage the product beyond repair and should not be used. Always ensure that you wipe dry the equipment after cleaning.

The Preparation Board can also be cleaned on the top tray of a domestic dishwasher on a standard/eco or cool program.

## REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

**If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.**

## CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

## IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.


Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

**Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX**  
**Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: [www.aidapt.co.uk](http://www.aidapt.co.uk)**  
**Email: [accounts@aidapt.co.uk](mailto:accounts@aidapt.co.uk) • [adaptations@aidapt.co.uk](mailto:adaptations@aidapt.co.uk) • [sales@aidapt.co.uk](mailto:sales@aidapt.co.uk)**



## **Plateau de Préparation**

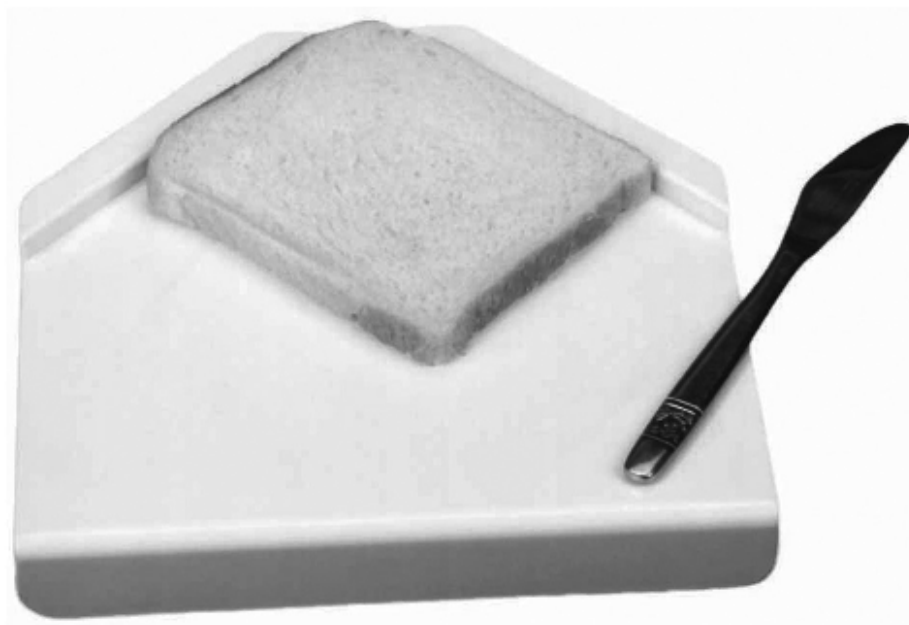

**VM982**

## **Notice d'Utilisation et d'Entretien**

## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté le plateau de préparation Aidapt. Celui-ci est fabriqué avec les meilleurs matériaux disponibles. Si vous l'utilisez correctement, il vous rendra service pendant de nombreuses années.

## AVANT UTILISATION

- Sortez le produit de l'emballage. N'utilisez pas de couteau, cutter ou autre objet tranchant car cela pourrait endommager l'éponge.
- Vérifiez que le produit est en bon état. En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Food preparation board for those with limited hand use.

## CONSEILS D'UTILISATION

L'utilisation du plateau de préparation est simple :

- Positionnez le plateau de préparation sur le plan de travail en plaçant le bord droit sur le bord du plan de travail pour bien maintenir le plateau de préparation en place.
- Le plateau possède un pied antidérapant, qui vous aidera à le maintenir en place.

## NETTOYAGE

Nettoyez votre plateau avec un détergent doux et un chiffon doux. N'utilisez jamais de détergent abrasif type AJAX car cela endommagerait le produit. Essuyez-le avec un torchon doux et sec.

Le plateau peut également être lavé au lave-vaisselle sur un programme standard/eco ou froid .

## RÉUTILISATION

Si vous n'avez pas utilisé cet produit pendant longtemps , vérifiez qu'il est en bon état.

**En cas de doute, ne l'utilisez pas ni ne le prêtez pas.**

## ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement l'état de votre produit.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations données dans cette notice d'utilisation ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un quelconque contrat ou engagement par Aidapt Bathrooms Limited Aidapt Wales ni ses agents ou filiales et aucune garantie n'est donnée concernant ces informations.

Nous vous remercions de faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.


**Altai France (Altai Europe Ltd)**

**Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France**

**Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: [altaieurope@orange.fr](mailto:altaieurope@orange.fr)**



## **Schneidebrett**

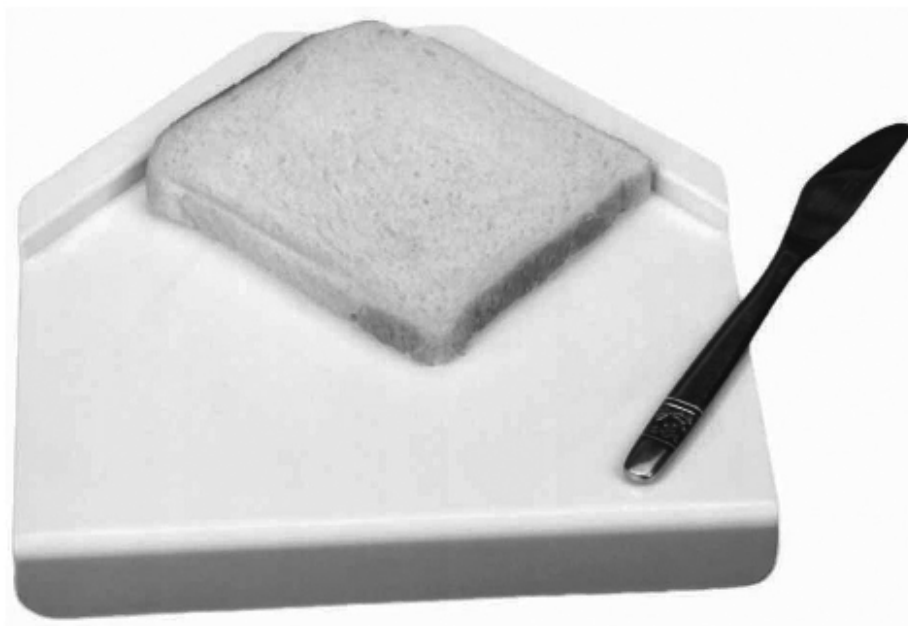

**VM982**

## **Gebrauchs- und Wartungsanleitung**

## **EINFÜHRUNG**

Vielen Dank für Ihren Erwerb dieses Schneidebretts von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

## **VOR GEBRAUCH**

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.

Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## **VERWENDUNGSZWECK**

Dieses Schneidebrett wurde speziell für Personen entwickelt, die ihre Hände nur eingeschränkt gebrauchen können.

## **GEBRAUCH**

Dieses Schneidebrett ist leicht zu benutzen:

- Positionieren Sie das Schneidebrett auf Ihrer Arbeitsoberfläche so, dass die gebogene Vorderkante des Schneidebretts über die Kante Ihrer Arbeitsoberfläche lappt, um das Schneidebrett so an Ort und Stelle zu halten.
- Das Schneidebrett ist außerdem mit Anti-Rutsch-Füßen ausgestattet, die es zusätzlich festhalten.
- Die hochgestellten Hinterkanten des Schneidebretts sind dazu da, um Brot und andere Speisen zu fixieren, wenn Sie sie schneiden oder bestreichen möchten.

## **REINIGUNG**

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem milden Waschmittel und mit einem weichen Tuch; benutzen Sie keinesfalls einen scheuernden Reiniger, wie z.B. AJAX, oder scheuernde Schwämme, da diese das Produkt irreparabel beschädigen könnten. Nach der Reinigung stets trocken wischen.

Dieses Produkt kann auch mit einer regulären Geschirrspülmaschine gewaschen werden (Standard-, Öko- oder Kalt-Programm).

## **NEUVERGABE**

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

**Im Zweifelsfall bitte nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.**

## **PFLEGE & WARTUNG**

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

## **WICHTIGE INFORMATIONEN**

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

**Altai Germany (Altai Europe Ltd.)**  
**Reklamationen & Rücksendungen an:**  
**W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve**  
**Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815**