



VG811C/VG811BL/VG811BR/VG808SD

Chaise réglable en hauteur à dossier haut



Instructions d'utilisation et d'entretien

Ce fichier peut être consulté et téléchargé au format PDF sur www.aidapt.co.uk. Les clients malvoyants peuvent utiliser un lecteur PDF gratuit (comme adobe.com/reader) pour zoomer et augmenter la taille du texte pour une meilleure lisibilité.

VG811C	Chaise Chelsfield à dossier aillé (crème)
VG811BL	Chaise Chelsfield à dossier aillé (Bleu)
VG811BR	Chaise Chelsfield à dossier aillé (marron)
VG811C	Chaise Longfield à dossier uni (marron)


Poids maximum de l'utilisateur 140 kg (22 st.)

NE PAS DÉPASSER LA LIMITE DE POIDS - Cela pourrait mettre l'utilisateur en danger.

NB Il est recommandé que cet équipement soit installé par une personne compétente et qu'une évaluation des risques soit entreprise quant à l'adéquation pour l'utilisateur. Ne pas utiliser sur des surfaces inégales.

LISTE DES PIÈCES

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant l'assemblage. Contactez votre fournisseur si des pièces manquent.

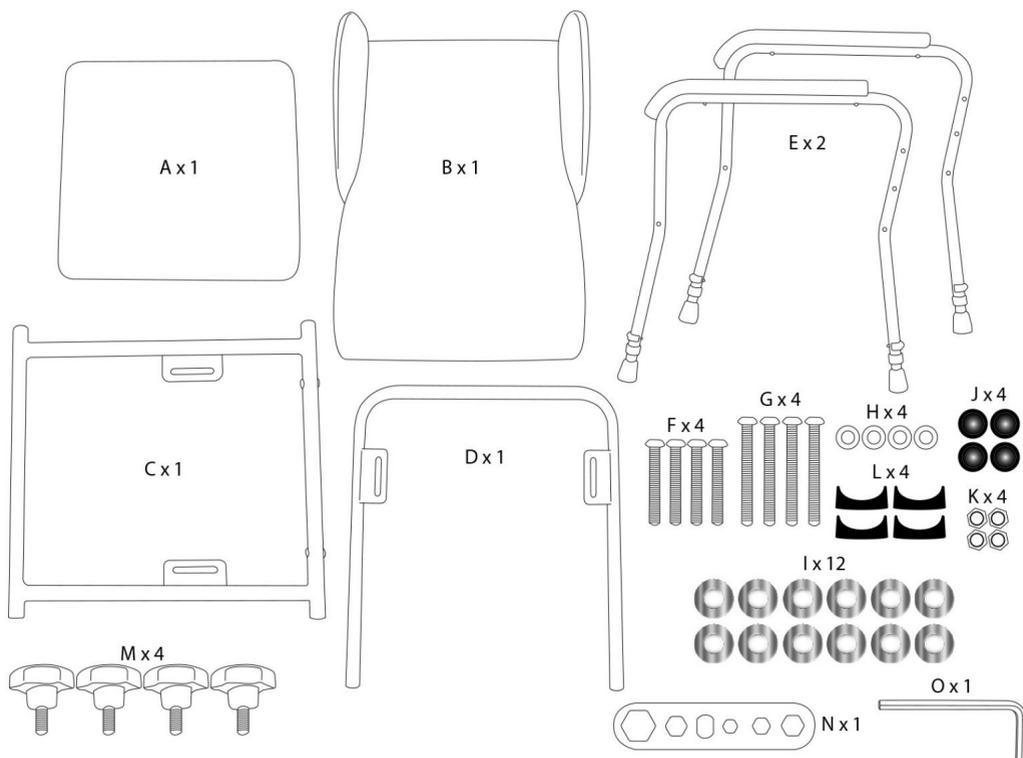

A : Siège rembourré	H : Rondelle
B : Dossier rembourré	I : Rondelle incurvée
C : Châssis du siège	J : Capuchon de couverture de bouton
D : Châssis du siège arrière	K : Noix
E : Côtés de la chaise	L : entretoise en plastique
F : Boulon (court)	M : molettes
G : boulon (long)	N : Clé
	O : Clé Allen


ASSEMBLAGE :

Nécessite au moins 2 personnes pour l'assemblage.

Assemblez la chaise selon les instructions de montage ci-dessous.

MODE D'EMPLOI :


1) Fixez le cadre du siège (C) aux côtés du fauteuil (E) à l'aide d'un boulon court (F), d'une entretoise en plastique (L) et d'une rondelle incurvée (I). • Assurez-vous que les supports du siège sont orientés vers le haut et que l'étiquette Aidapt se trouve à l'arrière. (fig. 1) • Poignées en mousse tournées vers l'avant. • Etiquette au dos. • Supports vers le haut.

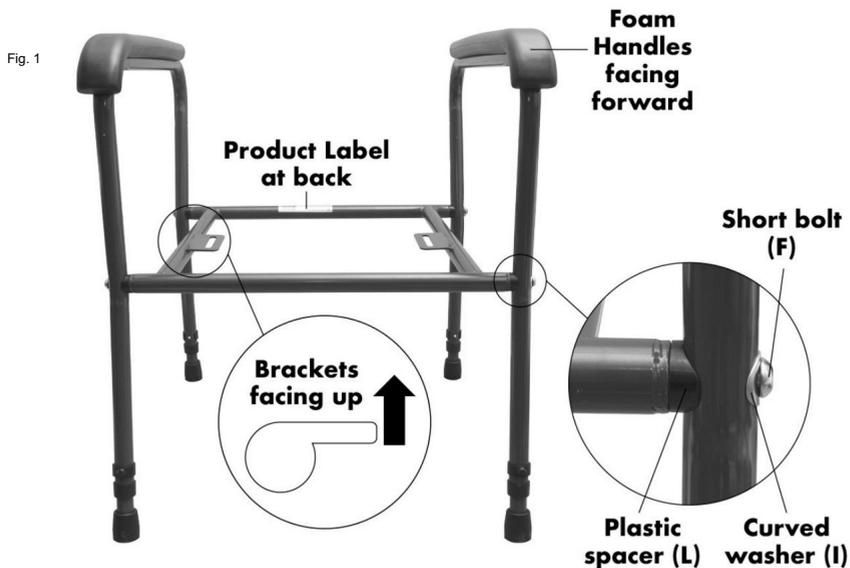

2) Utilisez une clé Allen (O) pour fixer le cadre du siège arrière (D) aux côtés du fauteuil (E), en vous assurant que les supports du cadre du siège arrière (fig. 2) sont à l'intérieur, à l'aide d'un boulon long (G), de 3 rondelles (H) et 1 écrou (K). (fig. 3)

Répétez cette étape pour vous assurer qu'il y a 2 boulons (G) fixés des deux côtés.

Assurez-vous que les boulons (G) sont serrés avant utilisation, puis couvrez l'extrémité du boulon à l'aide des cache-boulons (J). (fig. 4) Utilisez la clé (N) pour mettre l'écrou (K).

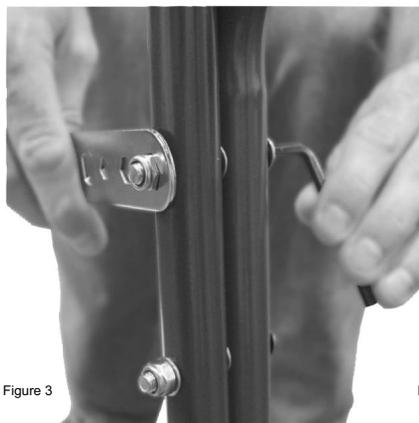

- 3) Fixez le siège rembourré (A) au cadre du siège (C) à l'aide de 2x molettes (M), en veillant à ce qu'ils soient bien attachés. (fig. 5)
Veillez noter : le siège rembourré peut être déplacé vers l'avant ou vers l'arrière.



Figure 5

- 4) Fixez le dossier rembourré (B) au cadre du siège arrière (D), à l'aide de 2 molettes (M), en vous assurant qu'elles sont bien fixées. (fig. 6)

Veillez noter : le dos rembourré peut être déplacé vers le haut ou vers le bas.



Figure 6

RÉGLAGE DE LA POSITION DU SIÈGE ET DU

DOSSIER Le dossier et le siège peuvent être réglés en fonction des besoins de l'utilisateur. Dévissez simplement les 2x molettes (M) (fig. 5 ou fig. 6), repositionnez le dossier du siège selon vos besoins, puis serrez les deux molettes.

NETTOYAGE

Un guide utile pour la décontamination est le dépliant MHRA DB2003(06).

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs car cela pourrait endommager la surface de l'équipement. Pour le nettoyage, essuyez avec un chiffon propre imbibé d'une solution détergente et essorez. Selon les instructions du fabricant du détergent, la solution peut être chauffée.

- Essuyez toutes les surfaces de l'équipement et le chiffon doit être réimmergé périodiquement et le détergent changé fréquemment. Le détergent doit être rincé ou essuyé à l'aide d'un chiffon propre immergé dans de l'eau propre et essoré dehors.
- Pour désinfecter, s'assurer que le matériel a été nettoyé et séché puis essuyer avec un chiffon propre et un désinfectant liquide compatible. Après désinfection, nettoyer à l'eau claire et sécher. • Lors de l'utilisation de détergents ou de désinfectants, veuillez vous reporter aux instructions du fabricant et, en cas de doute, veuillez consulter votre spécialiste local du contrôle des infections pour obtenir des conseils. • Ce produit ne convient pas au nettoyage à la chaleur humide ou à l'autoclave.

Si vous rééditez ou êtes sur le point de rééditer ce produit, veuillez vérifier la sécurité de tous les composants et en particulier serrer tous les écrous et boulons, que la chaise est stable, qu'il n'y a pas de déchirures ou de fissures dans le rembourrage et que les clips en « E » sont montés correctement.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur jusqu'au sommet du dossier1050- 1285mm
Empreinte de la chaise	540 x620mm Largeur
du siège à l'intérieur de l'accoudoir	460mm Largeur du siège à
l'extérieur de l'accoudoir	570mm Hauteur jusqu'au dessus
du coussin de siège	440mm Poids
net.....	15.4kg

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Retirez le clip en « E » du pied d'extension et étendez tous les pieds uniformément à la hauteur désirée, en vous assurant de ne pas dépasser le dernier trou percé du pied d'extension. (fig. 7)

Une fois que vous avez atteint la hauteur souhaitée, réinstallez le clip en « E », en vous assurant qu'il a traversé le pied d'extension et qu'il est bien ajusté et bien ajusté autour du pied extérieur. (fig. 8 et fig. 9)

Assurez-vous que les mêmes trous sont utilisés sur chaque jambe. Si les pieds sont montés de manière inégale ou inclinés, cela pourrait compromettre la sécurité de l'utilisateur.

