

Aniosyme X3



Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation

Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation

- Formule brevetée
- Complexe tri-enzymatique
- Produit non corrosif pour les matériaux




Aniosyme X3

Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation

Données physico-chimiques

- Efficacité démontrée (PND*)
*Pouvoir Nettoyant Dégraissant
- pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium
- Formulé sans chlorure : effet anticorrosif vis-à-vis des matériaux
- Compatible avec les ultra-sons
- Liquide limpide bleu
- pH après dilution (0,5 %) en eau du réseau : environ 7,5

Mode d'emploi

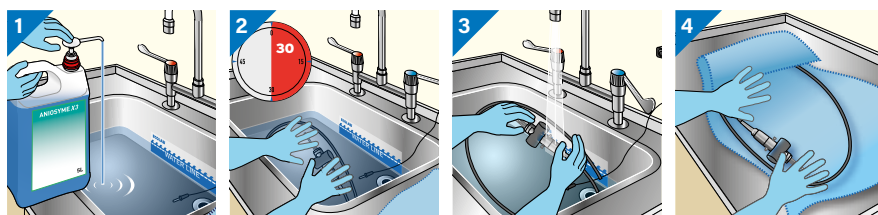

Solution concentrée. Amorcez la pompe associée avant la première utilisation. S'utilise en trempage à la dilution requise, en respectant le temps de contact indiqué.

Immerger totalement le dispositif médical. Garder le bain de trempage couvert pendant le temps de contact. Brosset si présence de souillures apparentes.

Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau pour éliminer toute trace de produit et souillure organique.

Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et au minimum une fois par jour pour maintenir l'efficacité du produit.

Propriétés microbiologiques

Activité/Conditions	Concentration	Temps de contact
Bactéricide* Selon EN 13727 and EN 14561	0.5 %	7 min
Levuricide* Selon EN 13624 and EN 14562	0.5 %	30 min
Actif sur les virus enveloppés* Selon EN 14476/EN 17111	0.5 %	7 min

*= Conditions de saleté

Information

Produit	Conditionnement	Référence
Aniosyme X3	12 x 1 L doseur	26330956C
Aniosyme X3	4 x 5 L + pompe	26330366C



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Indications

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

Mode d'emploi

- Solution concentrée. Amorcez la pompe associée avant la première utilisation. S'utilise en trempage à la dilution requise, en respectant le temps de contact indiqué.
- Immerger totalement le dispositif médical. Garder le bain de trempage couvert pendant le temps de contact. Brosset si présence de souillures apparentes.
- Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau pour éliminer toute trace de produit et souillure organique.
- Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et au minimum une fois par jour pour maintenir l'efficacité du produit.

Composition

Propionate d'ammonium quaternaire, Digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), parfum, colorant, excipients.

Conditions de stockage


Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5°C et +25°C.

Certificats

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes d'ANIOSYME X3 est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

Pour une utilisation en toute sécurité des dispositifs médicaux

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.

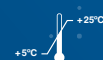

USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™

LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company