

seca 213 Toise mobile

Le stadiomètre seca 213 pèse seulement 2,4 kg et convient de ce fait parfaitement à une utilisation mobile, par exemple pour mesurer la taille d'enfants ou d'adolescents lors d'examens médicaux scolaires. La toise du stadiomètre seca 213 se compose de plusieurs éléments qui s'assemblent facilement et se montent sur la base avec peu de manipulations. Les cadrans fixés sur les côtés de la toise permettent la lecture même pendant la prise de mesure et garantissent ainsi un résultat très précis de la taille jusqu'à 205 cm.

- Plage de mesure : 20–205 cm
- Graduation : 1 mm
- Variante : seca 2131 avec niveau intégré à l'appuie-tête
- En option : sacoché de transport seca 412



La poignée intégrée et le système de blocage de chaque élément permettent un déplacement aisé.

Variante : Egalement disponible sous la référence seca 2131 avec niveau intégré à l'appuie-tête pour un positionnement optimal et des valeurs mesurées précises.




seca 222

optimisée

Toise télescopique mécanique à grande plage de mesure

Spécialement conçue pour le montage mural, cette toise indique la taille au millimètre près. Son large curseur ainsi que la butée de talon en font un instrument parfaitement professionnel. La construction télescopique permet une lecture commode du résultat de la mesure : à partir d'une valeur de 130,5 cm, la taille est lue au niveau d'un repère placé à cette hauteur. Par sécurité, le curseur peut être rabattu lorsque la toise n'est pas utilisée.

- Plage de mesure : 6–230 cm
- Graduation : 1 mm
- En option : appuie-tête seca 430

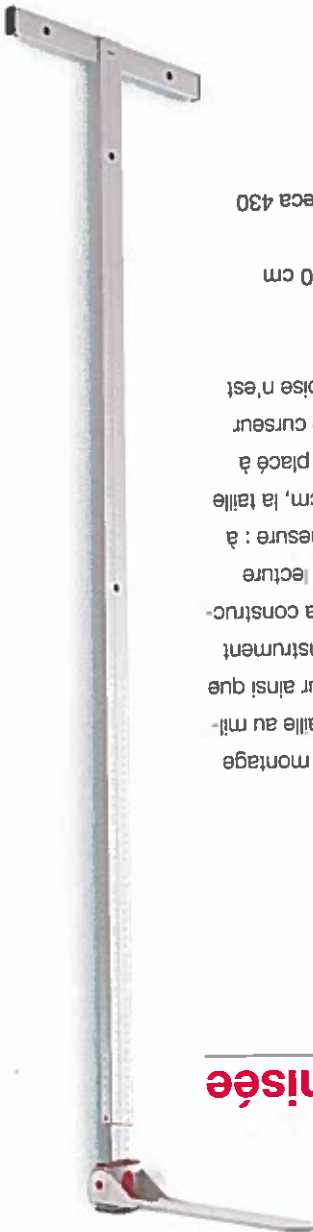

La butée de talon assure un positionnement exact et des résultats précis.

Nouveauté : Large appuie-tête seca 430 (disponible en option).

