

# PREMIERS SOINS



SÉCURITÉ AU  
TRAVAIL

Lavage oculaire  
Pansements  
Stations de premiers soins

plum

# Optimiser la sécurité. Systématiser les premiers soins.

Grâce aux concepts de premiers soins Plum, vous limitez la portée et l'impact des accidents, et vous améliorez la sécurité de vos employés et de votre entreprise



Des accidents plus ou moins graves se produisent tous les jours. Il est donc primordial d'avoir du matériel de premiers soins à portée de mains - à l'endroit exact où l'accident se produit.

Nous vous proposons, à vous et vos collègues, toute une gamme de produits et solutions de premiers soins qui vous permettront de soigner rapidement, de manière hygiénique et sûre, les coupures et blessures mineures ainsi que les contaminations oculaires. Nous avons donc mis au point des stations de premiers soins et des solutions mobiles qui assure votre sécurité en vous offrant un accès facile et immédiat aux premiers-soins.

## DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES POUR UNE AIDE IMMÉDIATE ET EFFICACE

Les produits de premiers soins comprennent une vaste gamme de solutions de lavage oculaire, pansements, lingettes pour le nettoyage de plaies... Vous pouvez choisir les produits dont vous avez véritablement besoin. Nous avons les solutions qu'il vous faut, que vous occupiez un poste en bureau ou manipulez des produits acides ou alcalins dans un environnement à hauts risques, impliquant le chargement de batteries lourdes, des opérations de nettoyage industriel, dans un laboratoire ou le secteur pétrochimique, par exemple.

## ” IL A PERDU UNE GRANDE PARTIE DE SA VUE LORSQUE LE TUYAU S'EST DESSERRÉ

Hanstholm Fiskemelsfabrik possède un site de production moderne. Il y a quelques années, il n'y avait que des dispositifs de lavage oculaire classiques dans l'usine. Un ouvrier a perdu une grande partie de la vue lorsqu'un tuyau s'est desserré et il a reçu de la soude dans les deux yeux. Après l'accident, l'usine a amélioré sa solution de premiers soins :

« Si nous avions eu la solution pH Neutral DUO, les conséquences de l'accident auraient été différentes. Nous en avons maintenant, » précise Ronni Jørgensen, responsable des achats.



Le lave-œil Plum vert vous aide à enlever les poussières et corps étrangers.

Le pH Neutral bleu est une solution de premiers soins à utiliser juste après les accidents impliquant des acides et alcalins.

Les flacons souples sont faciles à utiliser et permettent de rincer l'œil avec un flux doux et constant.

Il n'y a aucun doute sur la manière d'utiliser le flacon. Des pictogrammes très clairs vous montrent comment faire.

L'ocillère en plastique souple, ergonomique a été conçue pour s'adapter à la courbe de l'œil. Appuyez dessus avant de la placer sur votre œil. L'ocillère maintient votre œil ouvert et assure un flux de liquide fin et régulier en un temps de rinçage optimal.



Rapide et facile à ouvrir. Une rotation simple permet de casser l'opercule. Le flacon est alors prêt à l'emploi



Solution économique, affichant une durée de vie de 3 ans. La date d'expiration est clairement indiquée sur l'avant de l'étiquette.

Avec l'ocillère ergonomique DUO, vous pourrez rincer les deux yeux en même temps. L'ocillère DUO maintient vos deux yeux ouverts et assure dans chacun d'eux un flux de liquide fin et régulier en un temps de rinçage optimal.

## Une gamme de lave-œil complète.

Le lave-œil Plum vert rince les corps étrangers.

Le pH Neutral bleu neutralise les substances acides et alcalines.

### VOUS N'AVEZ QUE DEUX YEUX : PRENEZ-EN SOIN!

Votre vue fait partie des sens les plus importants. Prenez soin de vos yeux. Même en faisant extrêmement attention, vous n'empêchez pas tous les accidents, mais tout le monde peut se préparer. Avec nos solutions de lavage oculaire, vous faites de votre mieux.

En cas d'accident, les secondes peuvent s'avérer décisives pour votre vue. Il est donc indispensable de pouvoir accéder rapidement aux solutions de lavage oculaire sur tous les sites présentant un risque de blessures oculaires.

### UNE VASTE GAMME DE SOLUTIONS DE RINÇAGE UNIQUES

Notre vaste gamme de produits vous permet de disposer de la meilleure solution possible, parfaitement adaptée à vos besoins. N'hésitez pas à choisir des stations murales de diverses tailles à installer directement sur le lieu de travail, ou des solutions mobiles à installer dans les véhicules, la boîte à outils et la trousse de premiers secours, sur un chariot de nettoyage, ou dans notre sacoche-ceinture.

Les flacons disposent d'un marquage CE conformément aux principes de classification des équipements et dispositifs médicaux.



# Prévention des blessures oculaires

Le lave-œil Plum vert permet de rincer de votre œil les corps étrangers comme la poussière et la saleté, tandis que le pH Neutral bleu neutralise les produits acides et alcalins.

Nos concepts ont été mis au point en étroite collaboration avec des spécialistes des lésions et blessures oculaires. Cela signifie que les produits ont été élaborés et réfléchis jusque dans les moindres détails. Ils sont faciles à utiliser. Des pictogrammes très clairs vous indiquent l'utilisation correcte. L'œillère vous aide à garder l'œil ouvert. Le liquide de rinçage soigne l'œil au bon endroit, avec la bonne quantité de produit et un flux doux et constant.



Le lave-œil Plum est facile d'utilisation en cas d'accident.



Tourner l'œillère dans le sens de la flèche jusqu'à ce que la fermeture cède.



Pencher la tête, appuyer sur le flacon et rincer.



L'œil peut aussi être rincé en vous penchant vers l'avant et en appuyant doucement sur le flacon.

## PLAN D'URGENCE OCULAIRE

1	2	3	4
Déterminer le type de substance	Sélectionner le lave-œil adapté et rincer	Poursuivre le rinçage avec le lave-œil Plum	Rincer en suivant les consignes indiquées
<b>Corps étrangers</b> Poussière, saletés, métaux, bois, éclats etc.	Lave-œil Plum	Lave-œil Plum	Rincer jusqu'à évacuation des corps étrangers
<b>Acides</b>	pH Neutral	Lave-œil Plum	Rincer pendant 2 minutes environ avec la solution pH Neutral et continuer à utiliser le lave-œil Plum jusqu'à votre arrivée chez un médecin ou aux urgences.
<b>Alcalins</b>	pH Neutral	Lave-œil Plum	Rincer pendant 2 minutes environ avec la solution pH Neutral et continuer à utiliser le lave-œil Plum jusqu'à votre arrivée chez un médecin ou aux urgences.
<b>Autres produits chimiques (ex.: solvants ou huiles)</b>	Lave-œil Plum	Lave-œil Plum	Rincer jusqu'à votre arrivée chez un médecin ou aux urgences.

Toujours vérifier que le liquide de lavage oculaire entre en contact avec l'œil avec un flux doux et constant. En cas de blessures aux deux yeux, utiliser un flacon DUO pour rincer les deux yeux simultanément.



# Traitez vos deux yeux simultanément avec Plum DUO

L'œillère Plum DUO est une solution unique sur le marché. Vous n'avez plus à choisir quel œil sauver en premier.

## **PRÈS DE LA MOITIÉ DES ACCIDENTS TOUCHENT LES DEUX YEUX**

D'après les statistiques, près de la moitié des accidents oculaires impliquant des produits chimiques touchent les deux yeux. Avec notre œillère DUO, vous êtes parfaitement préparé. Vous pouvez rincer les deux yeux en même temps et n'aurez plus à choisir quel œil sauver en premier.

## **L'OEILLÈRE ASSURE UN RINÇAGE OPTIMAL**

Le temps est un facteur crucial, notamment en cas d'accident impliquant un produit acide ou alcalin. Il va sans dire que la blessure dépend de la concentration de l'acide ou de la base, mais en dehors de cet aspect, le temps de contact joue un rôle crucial. Le premier soin optimal doit donc neutraliser la substance nocive aussi vite que possible. Avec l'œillère DUO unique en son genre, vous traiterez les deux yeux en même temps.

L'œillère est conçue pour vous aider à garder vos yeux ouverts pendant le traitement et à assurer un flux de liquide fin et régulier en un temps de rinçage optimal.

Le lave-œil Plum et pH Neutral sont des produits à usage unique, ce qui permet au liquide de rinçage de rester stérile à tout moment.

plum



## Lavage oculaire en cas de corps étrangers

Le lave-œil Plum peut supprimer la sensation d'inconfort provoquée par les corps étrangers dans vos yeux et prévenir les complications qui y sont associées.

---

Il est fréquent d'avoir un corps étranger dans l'œil : de la poussière ambiante, des impuretés, des agents nettoyants ou de la peinture présente sur vos mains. Le risque est supérieur lorsque vous travaillez sur des machines et avec des outils susceptibles de projeter des éclats de bois ou métaux dans vos yeux.

La pénétration d'un corps étranger dans votre œil peut être très désagréable, car l'œil est très sensible. Sans traitement, cela risquera de développer une inflammation de l'œil, la cornée ou l'iris. En rinçant immédiatement après l'accident, vous préviendrez ces risques et empêcherez les corps étrangers de pénétrer dans l'œil.

Le lave-œil Plum contient une solution saline stérile de chlorure de sodium à 0,9 %, correspondant au liquide naturel de l'œil. L'œil sera rincé avec un flux doux et régulier. La gamme de produits comprend tout ce dont vous pourrez avoir besoin, du petit flacon pratique que vous pourrez toujours avoir sur vous aux stations murales qui vous offriront un accès immédiat aux premiers-soins en cas d'urgence.



**200 ML  
LAVE-CÉIL PLUM**

Un flacon compact et pratique contenant du chlorure de sodium stérile à 0,9 %  
Le flacon est facile à stocker dans une sacoche-ceinture spécialement conçue à cet effet ou dans le kit de premiers soins, la boîte à outils etc. Il est livré avec un couvercle anti-poussière.

**Temps de rinçage :** environ 2 min.  
**Conditionnement :** 10 x 200 ml  
**Réf. :** 4691



**500 ML  
LAVE-CÉIL PLUM**

Un flacon pratique contenant du chlorure de sodium stérile à 0,9 % à utiliser individuellement ou en tant que recharge sur des stations et coffrets de lavage oculaires. Il est fourni avec un couvercle anti-poussière.

**Temps de rinçage :** environ 5 min.  
**Conditionnement :** 12 x 500 ml  
**Réf. :** 4604



**1000 ML  
LAVE-CÉIL PLUM**

Flacon contenant du chlorure de sodium stérile à 0,9 %. Contient 1000 ml de lavage oculaire, ce qui assure un effet de rinçage plus long. Le flacon peut être utilisé individuellement ou en tant que recharge dans des stations et coffrets de lavage oculaires. Il est fourni avec un couvercle anti-poussière.

**Temps de rinçage :** près de 10 min.  
**Conditionnement :** 6 x 1000 ml  
**Réf. :** 4707



**500 ML  
LAVE-CÉIL PLUM DUO**

Flacon pratique contenant du chlorure de sodium stérile à 0,9 %. L'ocillère DUO ergonomique permet de rincer les deux yeux en même temps. Le flacon peut être utilisé individuellement ou en tant que recharge dans des stations et coffrets de lavage oculaires.

**Temps de rinçage :** environ 2 min.  
**Conditionnement :** 6 x 500 ml  
**Réf. :** 4861



**1000 ML  
LAVE-CÉIL PLUM DUO**

Flacon contenant du chlorure de sodium stérile à 0,9 %. Contient 1000 ml de lavage oculaire, ce qui assure un effet de rinçage plus long. L'ocillère DUO ergonomique permet de rincer les deux yeux en même temps. Le flacon peut être utilisé individuellement ou en tant que recharge sur des stations et coffrets de lavage oculaires DUO.

**Temps de rinçage :** environ 5 min.  
**Conditionnement :** 6 x 1000 ml  
**Réf. :** 4800



**3 X 500 ML  
LAVE-CÉIL PLUM**

Kit pratique et facile d'utilisation contenant 3 flacons de liquide de rinçage Plum avec du chlorure de sodium stérile à 0,9 %. La boîte est facile à prendre avec vous dans la voiture lorsque vous vous rendez chez le médecin ou aux urgences. Les flacons peuvent être utilisés individuellement ou en tant que recharges sur des stations et coffrets de lavage oculaires.

**Temps de rinçage :** près de 15 min.  
**Conditionnement :** 4 x 3 x 500 ml  
**Réf. :** 4620



# Lavage oculaire en cas d'accident chimique

pH Neutral neutralise les acides et les alcalins. Il les fait même disparaître de l'œil pendant le rinçage. Sécurité et effet prouvés !

## IMPORTANT

Il existe une restriction concernant l'acide fluorhydrique, qui est toxique et très corrosif pour la peau et les os. pH Neutral et le lave-œil Plum pourront neutraliser et rincer, mais ne limiteront pas l'effet corrosif. Ils ne sont donc pas recommandés comme premiers soins en cas d'accidents oculaires impliquant de l'acide fluorhydrique.

## UTILISATION RECOMMANDÉE DE PH NEUTRAL

pH Neutral est une solution de lavage oculaire de deux minutes par œil à utiliser en cas d'accident impliquant des acides ou des alcalins. Rincer avec pH Neutral pour neutraliser la valeur pH de la substance nocive à un niveau inoffensif le plus rapidement possible. Puis, continuer à rincer avec le lave-œil Plum de chlorure de sodium à 0,9 % jusqu'à votre arrivée chez un médecin ou aux urgences.

## LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX SONT OMNIPRÉSENTS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Dans un grand nombre de fonctions, entreprises et industries, vous êtes particulièrement exposé aux blessures oculaires graves causées par des produits chimiques. Dans les aéroports, les usines de produits chimiques, l'industrie du recyclage, dans les usines de ciment et sur les sites de construction, dans l'agro-alimentaire, la métallurgie, l'industrie papetière ou minière, ou encore dans la pétrochimie. Les acides et alcalins puissants sont utilisés dans la production et dans le cadre des opérations de nettoyage. Le risque d'accident, notamment lorsqu'un tuyau se desserre ou une batterie explose, fait partie du quotidien. Le pH Neutral doit toujours rester à portée de main.

## QUELQUES SECONDES PEUVENT VRAIMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE

Les acides et alcalins détruisent la structure des muqueuses et de la peau. Le niveau de gravité des blessures par corrosion dépend avant tout :

- De la concentration du produit chimique. Les alcalins et acides puissants sont très corrosifs.
- De la température. Une température élevée augmentera les propriétés corrosives du produit chimique.
- De la durée du contact. Plus longue est la durée, plus profonde sera la pénétration de la substance nocive.


En cas de blessures oculaires causées par des acides et des alcalins, il est important de neutraliser le produit chimique le plus rapidement possible à un niveau de pH de 7,4 environ, correspondant au niveau de pH normal du liquide lacrymal, de préférence avant que l'acide ou l'alcalin pénètre dans la cornée. Pour optimiser la sécurité en cas de risque de blessures acides et alcalines, la solution de lavage oculaire doit être :

- Facile d'accès
- Rapide à utiliser
- Efficace

## LE LIQUIDE DE LAVAGE OCULAIRE DOIT ÊTRE EFFICACE

pH Neutral est un tampon de phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement et efficacement tous les acides et alcalins, même les plus forts. Le liquide se compose de sels de phosphate présents dans le corps. Le tampon de phosphate d'hydrogène est efficace contre les acides, alors que le phosphate de dihydrogène réagit contre les alcalins. L'effet du pH Neutral a été confirmé par des études scientifiques.<sup>1) 2)</sup>

Nous avons testé l'effet neutralisant du pH Neutral pour les acides et alcalins puissants par rapport à l'effet d'un lavage oculaire ordinaire avec du chlorure de sodium à 0,9 %. Le test montre très clairement que pH Neutral neutralisera aussi rapidement les acides que les alcalins à un niveau de pH inoffensif. Les lave-œil classiques diluent le liquide, mais seuls de très légers changements au niveau de la valeur pH sont obtenus (schéma 1)

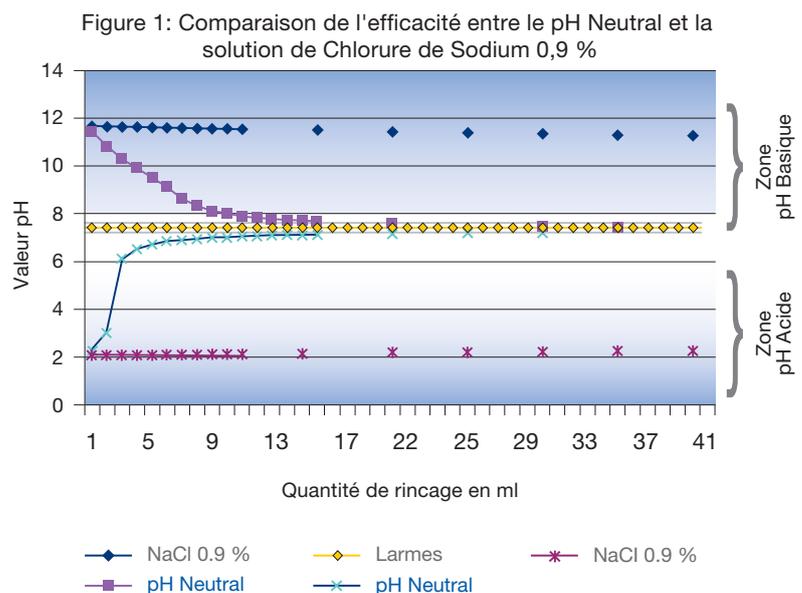

1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen. Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.

Toute la documentation est disponible sur demande.



**200 ML  
PH NEUTRAL**

Un flacon compact et pratique à glisser dans la poche. Il contient une solution à 4,9 % de tampon de phosphate stérile qui neutralisera rapidement les acides et les alcalins. Le flacon est facile à porter dans une sacoche-ceinture spécialement conçue à cet effet ou dans le kit de premiers soins, la boîte à outils etc. Il peut aussi être utilisé comme recharge dans les stations et coffrets de lavage oculaire. Il est fourni avec un couvercle anti-poussière.

**Temps de rinçage :** environ 2 min.  
**Conditionnement :** 10 x 200 ml  
**Réf. :** 4752



**500 ML  
PH NEUTRAL DUO**

Un flacon pratique contenant une solution à 4,9 % de tampon de phosphate stérile qui neutralisera rapidement les acides et les alcalins. L'ocillère DUO ergonomique permet de rincer les deux yeux en même temps. Le produit convient très bien aux postes de travail et fonctions présentant un risque de blessure pour les deux yeux. Le flacon peut être utilisé individuellement ou en tant que recharge dans des stations et coffrets de lavage oculaires.

**Temps de rinçage :** environ 2 min.  
**Conditionnement :** 6 x 500 ml  
**Réf. :** 4801



**1000 ML  
PH NEUTRAL DOUCHE OCULAIRE**

Un flacon contenant une solution à 4,9 % de tampon de phosphate stérile qui neutralisera rapidement les acides et les alcalins. Le flacon dispose d'une tête de rinçage spécifique qui répartira le jet et vous permettra de rincer rapidement et de manière homogène. Il peut être utilisé individuellement en atelier, dans la boîte à outils, dans la voiture, ou fixé au mur près de votre poste de travail. Il est fourni avec un couvercle anti-poussière.

**Temps de rinçage :** environ 2 min.  
**Conditionnement :** 6 x 1000 ml  
**Réf. :** 4746



” LES ACCIDENTS IMPLIQUANT DES ACIDES ET DES ALCALINS SE PRODUIRONT QUAND VOUS VOUS Y ATTENDREZ LE MOINS

pH Neutral DUO a sauvé la vue d'un employé de SITA France. L'entreprise traite les déchets plastiques comme les bouteilles en plastique avec des produits nettoyants. Le liquide d'un flacon de produits nettoyants a pénétré dans les deux yeux de l'employé. Grâce au pH Neutral DUO, la substance nocive a été neutralisée et l'employé a pu reprendre le travail le jour suivant.



Premiers soins | Lavage oculaire | Lave-œil pH Neutral | Stations de lavage oculaire | Distributeur de pansements | Station de premiers soins | Premiers soins mobiles | Recharges



# Stations de lavage oculaire pour les accidents impliquant des corps étrangers

Nos solutions murales rendent les premiers-soins visibles et faciles d'accès en cas d'accident.

## COFFRET MURAL PLUM DUO

Coffret mural étanche à la poussière en polystyrène résistant aux chocs avec 2 flacons de 1000 ml de lave-œil Plum DUO. Convient particulièrement bien aux postes de travail étroits et mobiles présentant un risque élevé de pénétration de poussière et saletés dans les deux yeux.

**Temps de rinçage :** près de 10 min.  
**Conditionnement :** 1  
**Réf. :** 4816  
**Dimensions :** L 357 x l 252 x H 116 mm

## PRENEZ LES PREMIERS SOINS AU SÉRIEUX

Avec nos stations murales, vous pourrez systématiser les premiers soins, faciliter leur accès et donc leur utilisation en cas d'accident. Choisir entre des stations murales ouvertes et des solutions en coffret. Ces dernières conviennent très bien aux environnements de travail poussiéreux afin de protéger les flacons et éviter d'ajouter plus de poussière dans l'œil en cas d'accident.

Veuillez toujours conserver les flacons à portée de main de manière à pouvoir poursuivre le rinçage pendant votre trajet chez le médecin ou aux urgences.



## CARTON SIMPLE DE LAVE-ŒIL PLUM

Carton simple avec 200 ml de lave-œil Plum. Le carton protège le flacon et est facile à ouvrir en cas de besoin. Idéal pour les postes mobiles, comme les véhicules d'installation et d'entretien et le transport de marchandises.

**Temps de rinçage :** environ 2 min.  
**Conditionnement :** 10  
**Réf. :** 4695  
**Support mural Réf. :** 955904  
**Dimensions :** L 163 x l 58 x H 58 mm



## CARTON SIMPLE POUR STATION DE LAVAGE OCULAIRE PLUM

Carton simple contenant 500 ml de lave-œil Plum et support mural. Le carton protège le flacon et est facile à ouvrir en cas de besoin. Idéal pour le rinçage oculaire rapide et facile dans de petits espaces de travail exposés à la poussière et la saleté.

**Temps de rinçage :** environ 5 min.  
**Conditionnement :** 12  
**Réf. :** 4609  
**Recharge article n° :** 4605  
**Support mural Réf. :** 955904  
**Dimensions :** L 214 x l 79 x H 79 mm



## STATION DE LAVAGE OCULAIRE PLUM DUO

Station de lavage contenant 1000 ml de lave-œil Plum DUO Convient particulièrement aux postes de travail mobiles et de petite taille sur lesquels il peut être utile de rincer les deux yeux de manière prolongée.

**Temps de rinçage :** environ 5 min.  
**Conditionnement :** 1  
**Réf. :** 4802  
**Dimensions :** L 375 x l 180 x H 95 mm



### COFFRET DE LAVAGE OCULAIRE PLUM

Coffret mural étanche à la poussière en polystyrène résistant aux chocs avec 2 flacons de lave-œil Plum de 500 ml. Convient très bien aux sites de fabrication exposés à de grandes quantités de poussière et saletés, et aux postes mobiles.

**Temps de rinçage :** près de 10 min.  
**Conditionnement :** 1  
**Réf. :** 4650  
**Dimensions :** L 280 x l 230 x H 110 mm

### DISPONIBLE ÉGALEMENT AVEC SYSTÈME CHAUFFANT INTÉGRÉ.

**Réf. :** 4649

### MONTAGE FACILE

Toutes les stations murales sont faciles à monter et sont livrées avec des pictogrammes qui expliquent clairement l'utilisation des produits.



### STATION DE LAVAGE OCULAIRE PLUM

Station murale avec 1 flacon de lave-œil Plum de 500 ml. Convient très bien aux espaces de travail de petite taille et postes mobiles.

**Temps de rinçage :** environ 5 min.  
**Conditionnement :** 1  
**Réf. :** 4611  
**Dimensions :** L 300 x l 170 x H 80 mm



### STATION DE LAVAGE OCULAIRE PLUM MAXI

Station murale avec 2 flacons de lave-œil Plum de 1 000 ml. Convient très bien aux postes de travail pouvant nécessiter un rinçage prolongé. Elle est fournie avec un couvercle anti-poussière.

**Temps de rinçage :** environ 20 min.  
**Conditionnement :** 1  
**Réf. :** 4708  
**Dimensions :** L 375 x l 260 x H 95 mm



### STATION DE LAVAGE OCULAIRE PLUM

Station murale avec 2 flacons de lave-œil Plum de 500 ml. Convient très bien aux environnements et petits espaces de travail qui ne sont pas sales, mais présentent un risque de pénétration de corps étrangers dans les yeux.

**Temps de rinçage :** près de 10 min.  
**Conditionnement :** 1  
**Réf. :** 4694  
**Dimensions :** L 290 x l 228 x H 80 mm



Un tuyau contenant du liquide pressurisé vient de brûler ou un tube s'est défilé d'une prise. Résultat : des liquides hautement corrosifs se déversent. C'est ainsi que les accidents les plus fréquents se produisent avec des produits chimiques liquides. En cas de contact avec les yeux, chaque seconde compte pour sauver votre vue.

# Stations de lavage oculaire en cas d'accidents avec des acides et alcalins

Avec le coffret combi, vous êtes protégé des accidents mineurs et graves impliquant des acides et alcalins.

## LAVE-ŒIL PLUM ET PH NEUTRAL : UNE ÉQUIPE DE CHOC

En cas d'accidents impliquant des acides et alcalins, nous recommandons un rinçage combiné, tout d'abord avec pH Neutral, puis avec le lave-œil Plum. Nous avons donc effectué une sélection des coffrets combi qui permettront dans un premier temps de neutraliser l'acide ou l'alcalin, puis de rincer jusqu'à votre arrivée chez un médecin ou dans un service d'urgences.

Si vous travaillez la plupart du temps avec des produits chimiques liquides, nous recommandons le modèle pH Neutral DUO, afin de pouvoir vous rincer les deux yeux en cas d'urgence.

Nous conseillons les stations ouvertes pour les environnements sans poussière ni saleté, comme les laboratoires, par exemple. Les coffrets fermés protègent les produits dans les environnements poussiéreux. Toutes les stations sont faciles à monter et sont livrées avec un miroir ainsi que des pictogrammes qui expliquent clairement l'utilisation des flacons de lavage oculaire.



### CARTON SIMPLE PH NEUTRAL

Carton simple avec 200 ml de pH Neutral. Le carton très résistant protège le flacon et est facile à ouvrir en cas de besoin. Permet de neutraliser rapidement les acides et les alcalins. Idéal pour les postes mobiles, comme les véhicules d'installation et d'entretien et le transport de marchandises.

**Temps de rinçage :** environ 2 min.  
**Conditionnement :** 10  
**Réf. :** 4755  
**Support mural article n° :** 955904  
**Dimensions :** L 163 x l 58 x H 58 mm



### NETTOYANT DE PLAIE QUICKCLEAN AVEC SUPPORT MURAL

Boîte contenant 40 lingettes pour le lavage de plaies, petites coupures et blessures. Proposé avec un support mural. Peut être installé le plus près possible du poste de travail. Chaque lingette est emballée séparément et contient de l'eau stérile. Les lingettes mesurent 130 x 200 mm.

**Conditionnement :** 6 x 40  
**Réf. :** 5550  
**Dimensions :** L 150 x l 80 x H 64 mm



### STATIONS DE PREMIERS SOINS

Stations murales avec lave-œil Plum, distributeurs de pansements QuickFix, lingettes pour le lavage de plaies QuickClean, miroir et pictogramme.

**CONTENU :**

1 x 500 ml de lave-œil Plum	<b>Réf. :</b> 4604
1 x 40 pansements QuickClean	5 551
lingettes de nettoyage	
1 x distributeur avec 45 pansements élastiques et 45 pansements imperméables	5 507

**Conditionnement :** 1  
**Réf. :** 5101  
**Dimensions :** L 515 x l 300 x H 85 mm



### COFFRET COMBI PLUM DUO

Coffret mural étanche à la poussière en polystyrène résistant aux chocs contenant 500 ml de pH Neutral DUO et 500 ml de lave-œil Plum DUO. Idéal pour les espaces de production poussiéreux présentant un risque d'accidents impliquant des corps étrangers, des acides et des alcalins, et un risque de blessures pour les deux yeux.

#### Temps de rinçage :

pH Neutral pendant environ 2 min.  
Lave-œil Plum pendant environ 2 min.

#### Conditionnement :

1

#### Réf. :

4862

#### Dimensions :

L 280 x l 230 x H 110 mm



### COFFRET COMBI PLUM DUO MAXI

Coffret mural étanche à la poussière en polystyrène résistant aux chocs contenant 500 ml de pH Neutral DUO et 1 000 ml de lave-œil Plum DUO. Idéal pour les espaces de production poussiéreux présentant un risque d'accidents impliquant des corps étrangers, des acides et des alcalins, et un risque de blessures pour les deux yeux.

#### Temps de rinçage :

pH Neutral pendant environ 2 min.  
Lave-œil Plum pendant environ 5 min.

#### Conditionnement :

1

#### Réf. :

4810

#### Dimensions :

L 357 X L 252 X H 116 mm



### COFFRET COMBI PLUM

Coffret mural étanche à la poussière en polystyrène résistant aux chocs contenant 200 ml de pH Neutral et 500 ml de lave-œil Plum. Idéal pour les espaces de production poussiéreux présentant un risque d'accidents impliquant des corps étrangers, des acides et des alcalins.

#### Temps de rinçage :

pH Neutral pendant environ 2 min.  
Lave-œil Plum pendant environ 5 min.

#### Conditionnement :

1

#### Réf. :

4787

#### Dimensions :

L 280 x l 230 x H 110 mm

#### DISPONIBLE ÉGALEMENT AVEC SYSTÈME CHAUFFANT INTÉGRÉ.

#### Réf. :

4664



### STATION DE DOUCHE OCULAIRE PH NEUTRAL

Station murale avec 1 000 ml de pH Neutral, qui vous permettra de neutraliser rapidement les acides et les alcalins. Le flacon dispose d'une tête de rinçage spécifique qui vous permettra de rincer rapidement et de manière homogène. Convient parfaitement au montage mural près du poste de travail. Elle est fournie avec un couvercle anti-poussière.

#### Temps de rinçage :

environ 2 min.

#### Conditionnement :

1

#### Réf. :

4741

#### Dimensions :

L 300 X L 160 X H 95 mm



### STATION COMBI PLUM

Station murale avec 200 ml de pH Neutral et 500 ml de lave-œil Plum. Idéale pour les espaces présentant un risque d'accidents pour les yeux impliquant des corps étrangers, des acides et des alcalins.

#### Temps de rinçage :

pH Neutral pendant environ 2 min.  
Lave-œil Plum pendant environ 5 min.

#### Conditionnement :

1

#### Réf. :

4773

#### Dimensions :

L 290 x l 228 x H 80 mm



### STATION COMBI PLUM DUO

Station murale avec 500 ml de pH Neutral DUO et 1000 ml de lave-œil Plum DUO. Idéale pour les espaces présentant un risque d'accidents pour les yeux impliquant des corps étrangers, des acides et des alcalins, et un risque de blessures pour les deux yeux.

#### Temps de rinçage :

pH Neutral pendant environ 2 min.  
Lave-œil Plum pendant environ 5 min.

#### Conditionnement :

1

#### Réf. :

4803

#### Dimensions :

L 375 x l 250 x H 95 mm

# Quick

# FIX

## QUICKFIX DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS UNIQUE EN SON GENRE :

- Met en évidence les pansements et permet leur accès immédiat.
- Chaque pansement est prêt à l'emploi, il vous suffit simplement de le tirer du distributeur.
- Chaque pansement est emballé individuellement.
- Une main vous suffira pour l'application.
- Rechargeable avec différents types de pansements.
- Niveau d'usure visible facilement.
- Permet d'arrêter facilement les saignements mineurs, sans souiller les autres pansements.
- Format compact : vous trouverez facilement de la place pour le distributeur QuickFix.
- Comprend une étagère pour ranger de petits objets indispensables.
- Possibilité de verrouillage anti-vol.



### QUICKFIX ÉLASTIQUE

Distributeur de pansements mural contenant 90 pansements en tissu élastiques et confortables qui s'adaptent aux mouvements de la peau. Les pansements respectent la peau et la laisse respirer.

Conditionnement :	1
Réf. :	5502
Recharge Réf. :	5512
Dimensions du distributeur :	L 230 x l 135 x H 32 mm
Dimensions du pansement :	L 72 x l 25 mm



### QUICKFIX IMPERMÉABLE

Distributeur de pansements mural contenant 90 pansements imperméables parfaitement adaptés aux environnements de travail présentant un niveau d'humidité élevé. Les pansements en PE protègent et laissent respirer la peau.

Conditionnement :	1
Réf. :	5501
Recharge Réf. :	5511
Dimensions du distributeur :	L 230 x l 135 x H 32 mm
Dimensions du pansement :	L 72 x l 25 mm



### QUICKFIX ÉLASTIQUE ET IMPERMÉABLE

Distributeur de pansements mural contenant 45 pansements élastiques et 45 pansements imperméables. Une combinaison de pansements répondant à de nombreux besoins sur le lieu de travail.

Conditionnement :	1
Réf. :	5507
Recharge Réf. :	5512 ET 5511
Dimensions du distributeur :	L 230 x l 135 x H 32 mm
Dimensions du pansement :	L 72 x l 25 mm

# QuickFix est une solution efficace et rapide face aux petits accidents du quotidien

Installez le distributeur au mur et gagnez du temps. Posez un pansement sur la plaie et retournez sain et sauf au travail !

## SOLUTION RAPIDE ET HYGIÉNIQUE EN CAS DE PETITES BLESSURES

Un grand nombre de petits accidents se produisent dans la vie professionnelle de tous les jours. Nous parlons de ces petits accidents qui nécessitent seulement la pose d'un pansement. Il est important de choisir le bon pansement adapté à chaque situation de travail. Plum propose des pansements adaptés à de nombreux environnements de travail, ex : environnement très humide et secteur agro-alimentaire. Tirez un pansement du distributeur, appliquez le sur votre plaie et reprenez votre travail. QuickFix résout simplement le problème de manière hygiénique et efficace.



Tirer le pansement du distributeur. Il est prêt à l'emploi...



... et peut être appliqué avec une seule main.



### QUICKFIX DÉTECTABLE

Distributeur de pansements mural contenant 90 pansements bleus et visibles avec un fil métallique intégré qui peut être suivi par un détecteur de métaux. Pansement dédié au secteur agro-alimentaire. Respecte et laisse respirer la peau. Les pansements ont une structure micro-aérée.

Conditionnement :	1
Réf. :	5503
Recharge Réf. :	5513
Dimensions du distributeur :	L 230 x l 135 x H 32 mm
Dimensions du pansement :	L 72 x l 25 mm



### QUICKFIX ÉLASTIQUE LONG

Distributeur de pansements mural contenant 60 pansements en tissu longs et élastiques qui s'adaptent aux mouvements de la peau. Les pansements respectent la peau et la laisse respirer. Le pansement long peut être enroulé plusieurs fois autour du doigt, ce qui assure une fixation impeccable.

Conditionnement :	1
Réf. :	5528
Recharge Réf. :	5508
Dimensions du distributeur :	L 230 x l 135 x H 32 mm
Dimensions du pansement :	L 120 x l 20 mm

## CHOISISSEZ PARMIS TROIS DIFFÉRENTS TYPES DE PANSEMENTS ET DEUX LONGUEURS

### QUICKFIX ÉLASTIQUE

Pansement agréable à la peau et confortable. Élastique, ce qui lui permet de s'ajuster aux mouvements de la peau et de la main.

### QUICKFIX IMPERMÉABLE

Pansement imperméable pour les environnements de travail présentant un niveau élevé d'humidité.

### QUICKFIX DÉTECTABLE

Pansement spécifique pour l'industrie agro-alimentaire. La couleur bleue et le fil métallique intégré permettent de suivre facilement le pansement de manière visuelle et avec un détecteur de métal.

### QUICKFIX LONG

Pansements extra-longs. Ils peuvent enrouler le doigt sur plusieurs tours, ce qui assure une fixation impeccable.



### QUICKFIX DÉTECTABLE LONG

Distributeur de pansements mural contenant 60 pansements longs, bleus et visibles avec un fil métallique intégré qui peut être suivi par un détecteur de métaux. Pansement dédié au secteur agro-alimentaire. Le pansement long peut être enroulé plusieurs fois autour du doigt, ce qui assure une fixation impeccable.

Conditionnement :	1
Réf. :	5529
Recharge Réf. :	5509
Dimensions du distributeur :	L 230 x l 135 x H 32 mm
Dimensions du pansement :	L 120 x l 20 mm



Premiers soins | Lavage oculaire | Lave-œil pH Neutal | Stations de lavage oculaire | Distributeur de pansements | Station de premiers soins | Premiers soins mobiles | Recharges



**QUICKFIX&RINSE** Distributeur mural avec 5 ampoules de lavage oculaire contenant du chlorure de sodium stérile à 0,9 % et 45 pansements en tissu micro-aéré et élastique. Le distributeur offre une solution facile, rapide et hygiénique en cas de petits accidents et la possibilité de combiner pansements et lavage oculaire.

**Conditionnement :** 1  
**Réf. :** 4631  
**Recharge Réf. :** 5512 et 5160  
**Dimensions du distributeur :** L 230 x l 190 x H 32 mm  
**Dimensions du pansement :** L 72 x l 25 mm



**QUICKRINSE** Distributeur mural avec 10 ampoules de lavage oculaire contenant 20 ml de chlorure de sodium stérile à 0,9 %. Le distributeur offre une solution facile, rapide et hygiénique. Le rinçage fait évacuer la poussière et les saletés présentés dans l'œil.

**Conditionnement :** 1  
**Réf. :** 4632  
**Recharge Réf. :** 5160  
**Dimensions du distributeur :** L 230 x l 135 x H 32 mm



## Ampoules compactes pour les accidents mineurs.

QuickRinse est une solution économique pour les accidents oculaires mineurs.

### UTILISER QUICKRINSE POUR LES PETITS RINÇAGES

L'œil est très sensible. Cela signifie que les petites irritations peuvent occasionner un certain inconfort avec une sensibilité nettement accrue à la lumière et de la douleur. Utiliser QuickRinse pour retrouver du bien-être et du confort. Chaque ampoule contient 20 ml, ce qui résout le problème causé par des yeux secs ou irrités. QuickFix&Rinse fait office de combinaison idéale, ce qui vous permet de toujours avoir des pansements et des ampoules de lavage oculaire à portée de main.

# Toujours à portée de main

Solutions pratiques qui vous permettent d'emporter partout les premiers soins avec vous

Nos pansements et ampoules compactes de lavage oculaire sont aussi disponibles dans des emballages pratiques qui vous permettront d'emporter facilement avec vous les premiers soins. Vous pourrez les ranger dans la boîte à gants, la boîte à outils, votre sac, une poche ou une boîte de premiers secours classique. Vous serez alors parfaitement préparé en cas de petits accidents qui surviennent toujours au mauvais moment et quand vous vous y attendez le moins.



## QUICKFIX MINI

Etui compact et pratique de 30 pansements élastiques. Facile à transporter dans tous les endroits où vous pourrez avoir besoin d'un pansement. Chaque pansement est emballé séparément et est prêt à l'emploi en le tirant simplement de la boîte. Les pansements respectent la peau et la laisse respirer. Ils sont très confortables, car ils s'adaptent parfaitement aux mouvements de la peau.

**Conditionnement :** 30 étuis x 30 pansements  
**Réf. :** 5504  
**Dimensions du pansement :** L 72 x l 25 mm



## QUICKRINSE MINI

Etui compact et pratique composé de 4 ampoules de lavage oculaire, contenant chacune 20 ml de chlorure de sodium stérile à 0,9 %. Une solution pratique qui vous permet de venir à bout rapidement de la poussière et des saletés présentes dans l'œil. Les ampoules s'ouvrent facilement en un tour de main et sont immédiatement prêtes à l'emploi. Grâce à ses dimensions compactes QuickRinse Mini vous suivra partout.

**Conditionnement :** 5 étuis x 4 ampoules  
**Réf. :** 4619



## SACOCHÉ-CEINTURE POUR FLACONS 200 ML

Sacoche pratique qui s'attache à votre ceinture ou vos vêtements de travail etc. Ouverture scratch qui vous permet un accès rapide aux premiers soins en cas d'accidents.

**Conditionnement :** 10  
**Réf. :** 4692



Premiers soins | Lavage oculaire | Lave-œil pH Neutral | Stations de lavage oculaire | Distributeur de pansements | Station de premiers soins | Premiers soins mobiles | Recharges

# QuickSafe® assure votre sécurité en vous offrant un accès facile et immédiat aux premiers-soins.

Quick-Safe est une solution unique qui offre une vue d'ensemble sur un système de premiers-soins spécifiques à vos besoins et vous permet ainsi de garder l'esprit tranquille.

## STATIONS DE PREMIERS SOINS PERSONNALISÉES

À vous de concevoir votre station de premiers soins en fonction de vos besoins. Lave-œil pour rincer les corps étrangers. pH Neutral en cas d'accidents avec des acides ou alcalins. Pansements adaptés à votre poste/environnement de travail. Gel anti-brûlure qui apaise les brûlures légères. Ampoules de lavage oculaire en cas d'accidents oculaires mineurs ou de poussière dans l'œil. Lingettes pour nettoyer les plaies. Des pansements compressifs. Tous ces équipements sont protégés par la façade transparente qui offre un aperçu idéal de ce dont vous avez besoin.



## ” POUR AVOIR LE BON ÉQUIPEMENT AU BON ENDROIT

Spæncom A/S fait partie des plus importants fournisseurs de béton. L'entreprise a choisi Plum Quicksafe® pour renforcer la sécurité de ses 500 employés. « Nous avons choisi Plum Quicksafe® car la station peut être configurée de manière à correspondre et s'adapter à chaque environnement de travail. Dans les zones où les éléments en béton sont nettoyés à l'acide, nous pouvons, par exemple, installer le lave-œil Plum et pH Neutral DUO près du poste de travail. QuickSafe® contient tout ce dont vous avez besoin. Il peut être positionné de manière à avoir à portée de main les premiers secours et il est très pratique avec sa façade transparente. » Jany Johannsen, Coordinateur Environnement et Sécurité



## QuickSafe® VIDE

### C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ!

Si vous souhaitez vous-même organiser vos premiers-soins en fonction de vos besoins, commencez par un coffret vide que vous remplissez selon les exigences et risques du terrain.



**ACHETEZ UNE STATION VIDE POUR LA REMPLIR EN FONCTION DE VOS BESOINS** Vous pouvez, bien sûr, choisir une solution 100 % personnalisée si vous avez des besoins qui ne peuvent pas être couverts avec les 4 solutions QuickSafe® présentées sur la page suivante. Vous pouvez commencer par une station murale et la remplir de flacons de lavage oculaire et d'autres produits de premiers soins.

Conditionnement : 1  
 Réf. : 5173  
 Dimensions : L 430 x l 253 x H 92 mm

# Les premiers-secours à portée de main

L'accès facile aux premiers soins indispensables pour renforcer la sécurité.

Avec QuickSafe®, vous regroupez les produits de premiers-soins les plus importants en un seul système que vous installez au plus près des postes de travail à risque. De la taille d'une feuille de papier A3, QuickSafe® se fixe partout où vous en avez vraiment besoin.

La façade transparente en polycarbonate vous donne un aperçu des produits disponibles et vous assure un accès facile et immédiat aux premiers-soins. Un simple coup d'œil suffit pour savoir quand il est temps de regarnir la station. Grâce à son système anti-poussière et ses éléments emballés séparément, QuickSafe® constitue une solution à la fois hygiénique, élégante et pratique.



**SCANNEZ LE CODE OU RENDEZ-VOUS SUR PLUM-QUICK-SAFE.COM ET VOUS VERREZ COMBIEN LES PREMIERS-SOINS PEUVENT ÊTRE SIMPLES.**

plum



## QuickSafe® BASIC

### UN BON POINT DE DÉPART

Avec QuickSafe® Basic, vous pouvez choisir les contenus des étagères supérieures. Vous profitez d'un niveau de flexibilité maximal.



### AVEZ-VOUS DES BESOINS SPÉCIFIQUES POUR VOTRE STATION DE PREMIERS SOINS ?

La célèbre solution de lavage oculaire de Plum est au cœur de toute la gamme QuickSafe®. QuickSafe® Basic est composé de lave-œil Plum, de pH Neutral, d'ampoules de lavage oculaire et de pansements. Vous pouvez compléter l'étagère du haut à votre guise suivant les besoins spécifiques de votre poste de travail.

CONTENU :	Réf. :
2 x 500 ml de lave-œil Plum	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x ampoules de 20 ml de lave-œil QuickRinse	5160
1 x recharge de pansements élastiques QuickFix contenant 45 pansements	5512

Conditionnement :	1
Réf. :	5170
Dimensions :	L 430 x l 253 x H 92 mm



## QuickSafe® COMPLETE

### LA SOLUTION COMPLÈTE

Lavage oculaire comprenant pH Neutral et des ampoules de lavage oculaire, des compresses, des lingettes pour le nettoyage des plaies, des pansements et du gel anti-brûlure pour apaiser les brûlures légères.



### PREMIERS-SOINS IMMÉDIATS ADAPTÉS À PLUSIEURS TYPES DE RISQUES

QuickSafe® Complete est composée de nombreux produits de premiers soins. Il s'agit de produits adaptés aux situations les plus critiques et à un grand nombre de petits accidents du quotidien.

CONTENU :	Réf. :
18 x gels anti-brûlure QuickCool	5150
1 x kit de compresses QuickStop	
1 x 17 x 17 cm et 2 x 12 x 7,5 cm	5152
20 x lingettes pour le nettoyage des plaies QuickClean	5151
2 x 500 ml de lave-œil Plum	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x ampoules de 20 ml de lave-œil QuickRinse	5160
1 x recharge de pansements élastiques QuickFix contenant 45 pansements	5512

Conditionnement :	1
Réf. :	5174
Dimensions :	L 430 x l 253 x H 92 mm



## QuickSafe® INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

### POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Une station composée des produits de premiers-soins répondant aux besoins spécifiques de l'agro-alimentaire.



### PREMIERS-SOINS IMMÉDIATS ET SPÉCIFIQUES À L'AGRO-ALIMENTAIRE

Une solution de premiers-soins dédiée aux besoins de l'agro-alimentaire, des cuisines de cantines et de restaurants. Contient notamment des pansements tissés bleus détectables courts et longs, des lingettes pour nettoyer les plaies, du gel anti-brûlures et des pansements compressifs.

CONTENU :	Réf. :
18 x gels anti-brûlure QuickCool	5150
1 x kit complet de compresses QuickStop 1 x 17 x 17 cm et 2 x 12 x 7,5 cm	5152
20 x lingettes pour le nettoyage des plaies QuickClean	5151
2 x 500 ml de lave-œil Plum	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
1 x recharge de pansements détectables QuickFix contenant 45 pansements	5513
1 x recharge de pansements longs détectables QuickFix contenant 30 pansements	5509

Conditionnement :	1
Réf. :	5175
Dimensions :	L 430 x l 253 x H 92 mm



## QuickSafe® INDUSTRIE CHIMIQUE

### SOLUTION MUSCLÉE FACE AUX RISQUES CHIMIQUES

Les accidents causés par des acides ou des alcalins peuvent avoir des conséquences graves et durables pour les personnes touchées.



### LES PREMIÈRES SECONDES SONT DÉCISIVES.

En cas de risque d'accidents impliquant acides ou alcalins, la sécurité est primordiale. Cette station contient en autres un flacon pH Neutral DUO qui permet de rincer simultanément les deux yeux.

CONTENU :	Réf. :
1 x 500 ml de lave-œil Plum DUO	4861
1 x 500 ml pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x ampoules de 20 ml de lave-œil QuickRinse	5160
1 x recharge de pansements élastiques QuickFix contenant 45 pansements	5512

Conditionnement :	1
Réf. :	5171
Dimensions :	L 430 x l 253 x H 92 mm



### QUICKSTOP

Lot de trois pansements compressifs assurant des premiers soins efficaces en cas d'hémorragie. Pansement stérile avec système de compresse intégré. Élastique, non adhésif et hypoallergénique. QuickStop s'utilise comme garrot, compresses, pansements de maintien et de protection.

#### LE SET CONTIENT :

1 x pansement compressif 17 x 17 cm  
2 x pansements compressifs 12 x 7,5 cm

**Conditionnement :** 6 lots x 3 pansements

**Réf. :** 5152



### NETTOYANT POUR PLAIE QUICKCLEAN

Boîte contenant 40 lingettes nettoyantes pour plaies, petites coupures et blessures. Chaque lingette est emballée séparément et contient de l'eau stérile. Peut être utilisée pour recharger la station de premiers soins et avec le support mural (p.12). Les lingettes mesurent 130 x 200 mm.

**Conditionnement :** 11 boîtes x 40 lingettes  
**Réf. :** 5551



### QUICKCLEAN

Lingettes permettant de nettoyer les petites plaies et coupures. Chaque lingette est emballée séparément et contient de l'eau stérile. Peut être utilisé individuellement et pour recharger les stations QuickSafe®. 20 lingettes par boîte.

**Conditionnement :** 6 boîtes x 20 lingettes  
**Réf. :** 5151



### QUICKCOOL

Gel anti-brûlure à utiliser en cas de brûlures légères et échaudures. Effet de refroidissement immédiat. Peut être utilisé individuellement et pour recharger les stations QuickSafe®. 18 sachets par boîte.

**Conditionnement :** 6 boîtes x 18 sachets  
**Réf. :** 5150

# Liste des recharges

Pour assurer le réassort régulier de vos premiers soins

Notre gamme de produits offre une grande flexibilité et s'adapte à vos besoins. Avec nos recharges, rien de plus simple que de maintenir le contenu de vos QuickSafe® et de vos distributeurs de pansements QuickFix constamment à jour.

Si les conditions et types de risques changent sur le lieu de travail, vous pouvez individualiser votre réassort en utilisant différents types de recharges.



**RECHARGE QUICKFIX IMPERMÉABLE**  
45 pansements imperméables parfaitement adapté aux environnements de travail présentant un niveau d'humidité élevé. Les pansements en PE protègent et laissent respirer la peau.

Conditionnement : 6 x 45  
Réf. : 5511  
Dimensions du pansement : L 72 x l 25 mm



**RECHARGE QUICKFIX ÉLASTIQUE**  
45 pansements en tissu élastiques et confortables qui s'adaptent aux mouvements de la peau. Les pansements respectent la peau et la laisse respirer.

Conditionnement : 6 x 45  
Réf. : 5512  
Dimensions du pansement : L 72 x l 25 mm



**RECHARGE QUICKFIX DÉTECTABLE**  
45 pansements bleus et visibles avec un fil métallique intégré qui peut être suivi par un détecteur de métaux. Pansement dédié au secteur agro-alimentaire. Respecte et laisse respirer la peau.

Conditionnement : 6 x 45  
Réf. : 5513  
Dimensions du pansement : L 72 x l 25 mm



**RECHARGE QUICKFIX ÉLASTIQUE LONG** 30 pansements en tissu longs et élastiques qui s'adaptent aux mouvements de la peau. Les pansements respectent la peau et la laisse respirer. Les pansements longs peuvent être enroulés plusieurs fois autour du doigt, ce qui assure une fixation impeccable.

Conditionnement : 6 x 30  
Réf. : 5508  
Dimensions du pansement : L 120 x l 20 mm



**RECHARGE QUICKFIX DÉTECTABLE LONG** 30 pansements longs, bleus et visibles avec un fil métallique intégré qui peut être suivi par un détecteur de métaux. Pansement dédié au secteur agro-alimentaire. Le pansement long peut être enroulé plusieurs fois autour du doigt, ce qui assure une fixation impeccable.

Conditionnement : 6 x 30  
Réf. : 5509  
Dimensions du pansement : L 120 x l 20 mm



**RECHARGE QUICKRINSE** 5 ampoules de lavage oculaire avec 20 ml de chlorure de sodium stérile à 0,9 %. Pour recharger les distributeurs QuickSafe®, QuickFix&Rinse et QuickRinse.

Conditionnement : 4 x 5  
Réf. : 5160



Plum A/S  
Frederik Plums Vej 2 • DK-5610 Assens  
Tél. +45 6471 2112  
info@plum.eu • www.plum.eu

plum