


VacuAide 7305

Aspirateur de mucosites

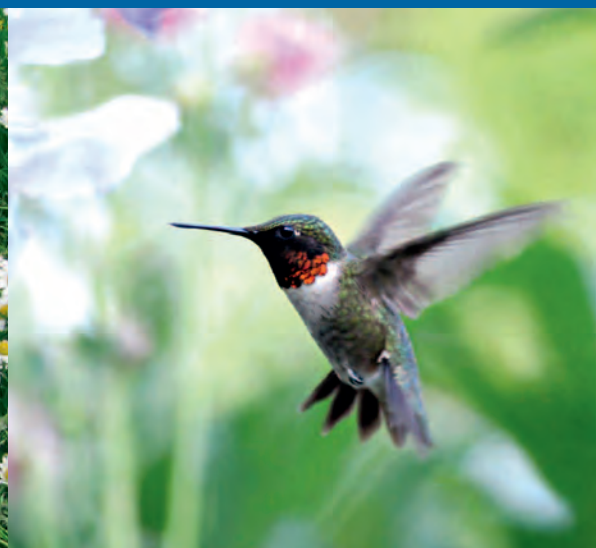

VacuAide 7305

Le modèle 7305 P est idéal pour une utilisation à domicile et répond aux rigoureuses normes ISO 601-1 pour l'aspirateur de mucosités de secours. Le 7305 P est compact et léger et grâce à ses hautes performances, répond aux besoins des patients.

Le 7305 P possède une batterie rechargeable interne et un cordon allume cigare 12 V en option; il s'agit donc d'un modèle véritablement transportable.

Caractéristiques et avantages

- Alimentation électrique : 100 - 240 V
- Puissance d'aspiration jusqu'à 550 mmHg (730 mbar)
- Débit jusqu'à 27 lpm
- Compact et léger pour un transport facile
- Filtre bactérien intégré
- Soupape d'arrêt du flotteur automatique (aspiration obstruée)

- Bocal à usage unique de 800 ml (standard)
- Bocal réutilisable de 1200 ml, en accessoire
- Manomètre intégré
- Batterie rechargeable, autonomie de 60 minutes
- Sacoche de transport incluse
- Cordon allume cigare disponible en option

Champs d'application

- Hygiène des bronches et des voies respiratoires
- Aspiration des mucosités des voies respiratoires



S P É C I F I C A T I O N S

Dimensions (H x L x P)

23 x 18 x 20 cm

Poids (sans transformateur)

2,9 kg

Puissance d'aspiration

80 - 550 mmHg

Débit

0,0 - 27 l / min¹⁾

Adaptateur CA

110 - 240 V; 50 / 60 Hz

Autonomie batterie

60 min.

¹⁾ Ces conditions peuvent varier selon l'altitude par rapport au niveau de la mer, et les changements de pression atmosphériques.



 **DeVilbiss**
HEALTHCARE

DeVilbiss Healthcare S.A.S.
13 - 17 Rue Joseph Priestley
37100 Tours
France
Tél.: + 33 (0) 2 47 42 99 42
Fax: + 33 (0) 2 47 42 99 44
www.devilbisshc.fr
enquetes@devilbisshc.com

Prestataire: