




Code	Description
04260P	Siège rembourré en U avec dossier et accoudoirs - Gris
04160P	Siège rembourré en U avec dossier et accoudoirs - Bleu

Garanties et Certifications

Garantie à vie
Testé BS EN 12182:1998 & BS EN 12727:2000

Tailles et Options

Ce siège existe en version bleu.

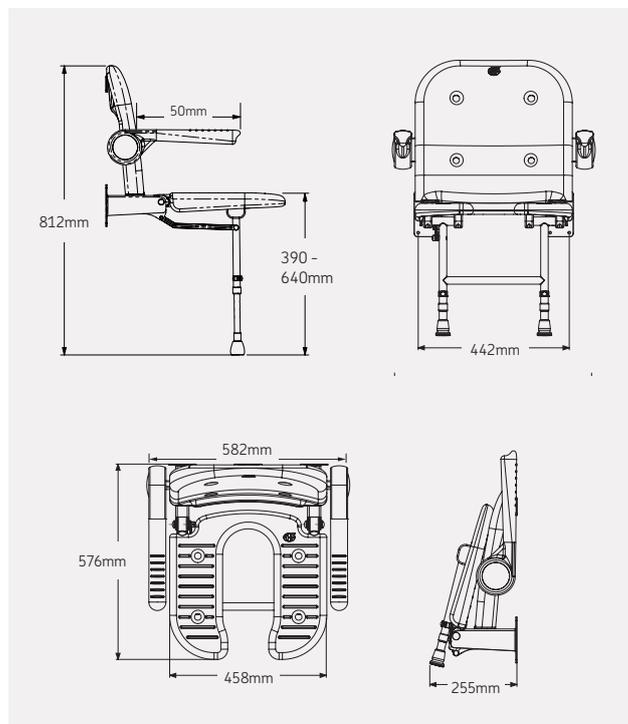

SIÈGE SÉRIE 4000

04260P - Siège rembourré en U avec dossier et accoudoirs

Texte descriptif CCTP

Siège de douche relevable avec Assise évidée pour faciliter la toilette intime, dossier et accoudoirs en mousse polyuréthane, garantie à vie, 10 points de fixations murales, pieds réglables de 390mm à 640mm hors mousse, P576mm x L (assise) 458mm évidé 150mm hors tout 582mm de couleur gris réf 04260P (RAL7035) ou bleu réf 04160P (RAL5005) de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Encombrement replié 255mm. Charge maximale (pression statique) : 253kg.

Avantages

- **Résistant** grâce à sa conception en acier inoxydable et ses 10 points de fixation qui permettent d'atteindre une charge de 253kg
- **Confortable** grâce à son assise rembourrée en U qui facilite la toilette intime
- **Sécurisant** grâce à son dossier et ses accoudoirs
- **Nettoyage facile** grâce à son assise et son dossier déclinables avec fentes d'évacuation

Caractéristiques

- Charge maximale : 253kg
- Dimensions : L582xP576 hors tout
- Dimensions replié : 255mm
- Assise : L458mm
- 10 points de fixation
- Coussin, assise et dossier déclinables pouvant être passés en étuve pour le nettoyage
- Réglable en hauteur hors mousse (de 390 à 640mm)
- Ajustement de planéité de +/- 13mm
- Pieds réglables finis par embout en caoutchouc blanc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
- Assise relevable
- Coloris : gris (RAL7035) et bleu (RAL5005)

Matériaux

- Structure du siège en acier inoxydable
- Coussin en polyuréthane