





AutoClean[®]

Nettoyeur Automatique

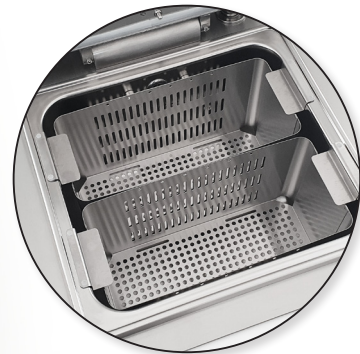

www.mhc-technology.com

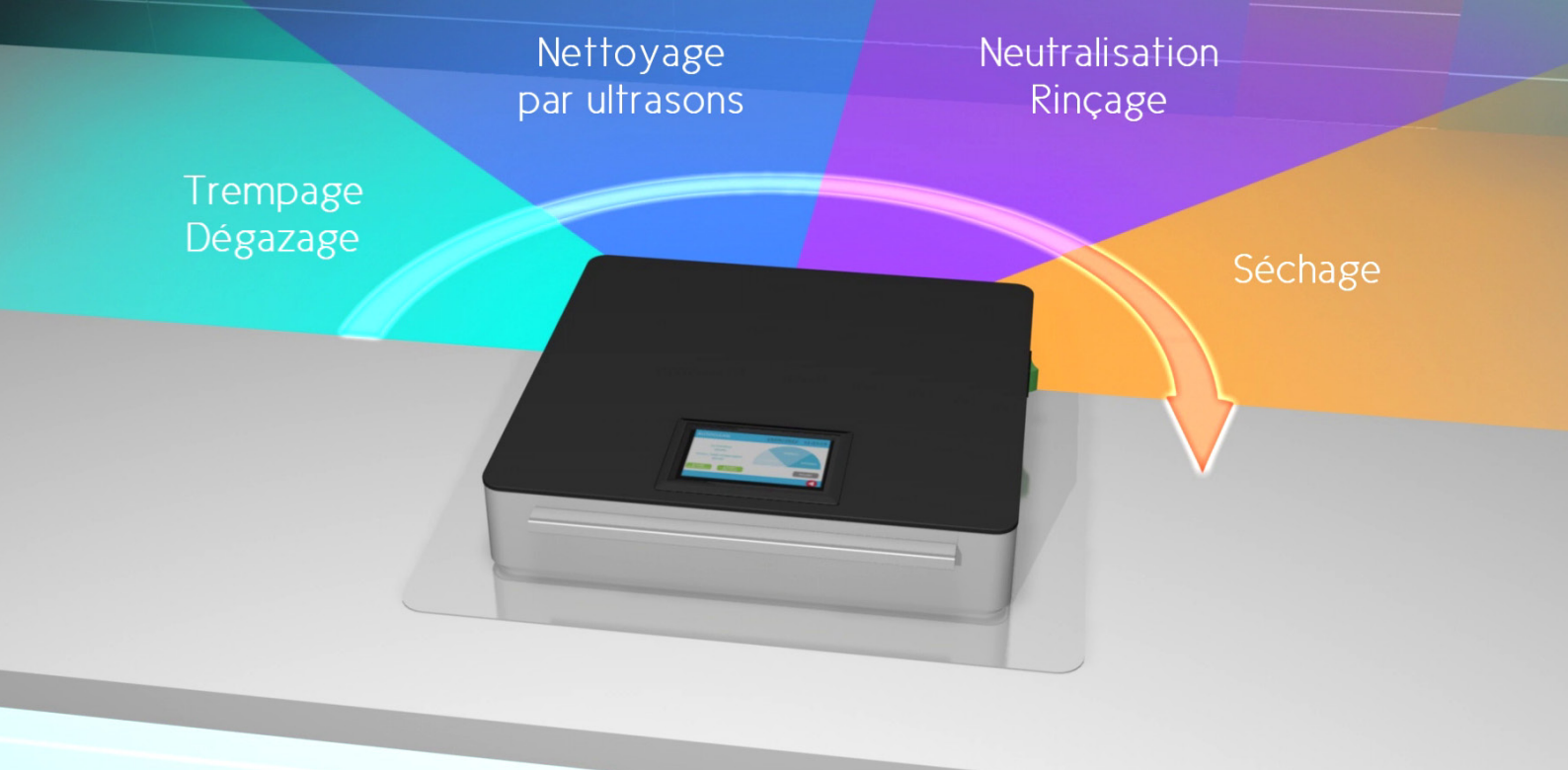

AutoClean® est un nettoyeur ultrasons automatisé de dernière génération.

Son réservoir de 19L lui permet de gérer une grande capacité d'instrumentation en un seul cycle.

L'**AutoClean** permet d'avoir une utilisation adaptée à vos besoins grâce à sa fonction demi-charge.

Contenance utile 15L en pleine charge et 9L en demi-charge.


Entièrement automatique, il permet de gagner un temps précieux pour les travaux de trempage, nettoyage et séchage.


Grâce à sa conception et son design moderne, l'**AutoClean** saura s'intégrer dans tous les cabinets dentaires.

Son panneau de commande tactile est intuitif, il permet la consultation de l'historique d'utilisation et donne également la possibilité d'une utilisation manuelle de chaque séquence.

- Cycle automatique ou manuel
- Utilisation économique (concentration produits 1%)
- Optimise le temps de l'assistante
- Encombrement réduit

Panneau de commande intuitif

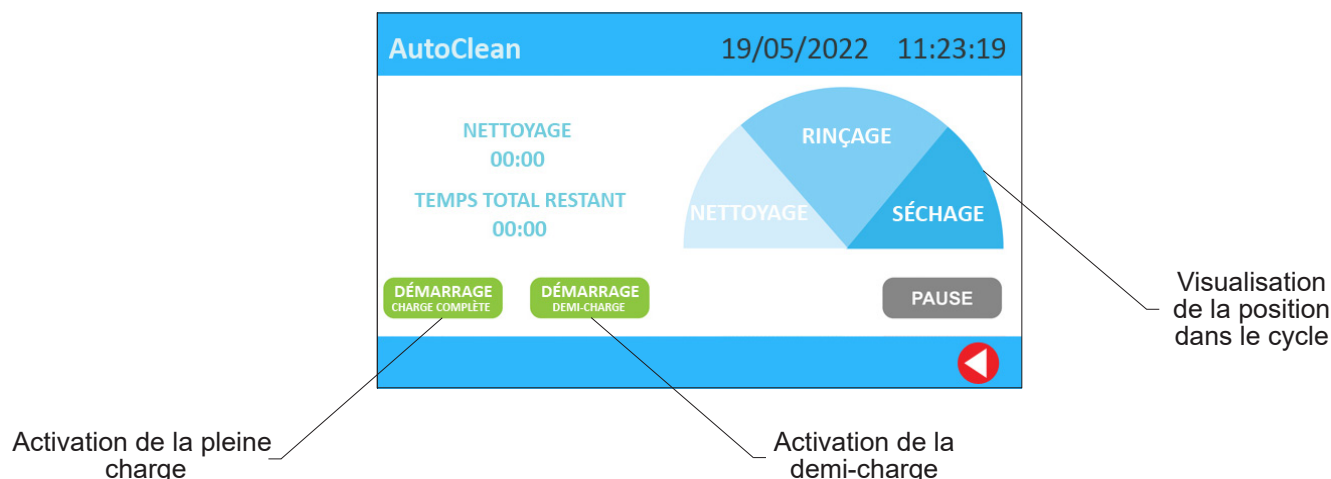

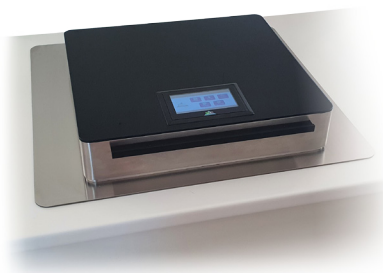

Caractéristique Techniques

- Alimentation:	230 V AC - 50Hz
- Puissance d'ultrasons:	400W
- Nombre de transducteurs:	8
- Fréquence de nettoyage:	38 ~ 42 KHz
- Puissance du sécheur :	1000W
- Puissance de chauffage:	200W
- Dimensions du bac (mm):	325 X 300 X 200 mm
- Dimensions sur table (L x l x h):	520 X 490 X 80 mm
- Dimensions sous table (L x l x h):	420 X 430 X 340 mm
- Dimension de la découpe (L x l x h):	440 x 450 mm
- Port USB:	Historique des cycles
- Vidange:	Vanne motorisée
- Fonction:	Manuelle / Automatique
- Sécurité couvercle:	Arrêt du cycle
- Volume de la cuve	19L
- Volume utile pleine charge:	15L
- Volume utile demi-charge :	9L
- Écran graphique tactile:	10 cm
- Poids:	28 kg
- Livré avec Panier	

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC190A	Nettoyeur ultrasons automatique	6990,00



AutoClean NET

Détergent désinfectant de l'instrumentation.

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel.

Nettoyage en bacs à ultrasons automatique.

Bidon de 5L

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC190B	Solution de lavage AutoClean NET	79,00




AutoClean RN

Neutralisation des résidus alcalins provenant des agents détergents et de l'eau lors du cycle de lavage automatique des instruments médico-chirurgicaux et dispositifs médicaux.

Bidon de 5L

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC190C	Solution de rinçage AutoClean RN	79,00

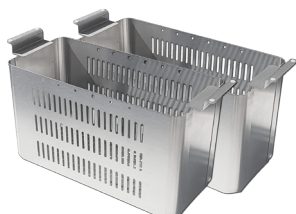

Demi-panier pour Nettoyeur automatique AutoClean

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC190F	Demi-panier / pièce	95,00



Panier pour Nettoyeur automatique AutoClean

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC190G	Panier AutoClean	139,00



MHC Technology

1001 chemin Hugues Béranguier

06610 LA GAUDE (France)

Tel: 04.93.58.17.16. Fax: 04.93.58.14.75

email: info@mhc-technology.com

www.mhc-technology.com