

# LED Hydra

Unique, ce nouveau modèle de lampe «spéciale esthétique» permet, en positionnant les deux lampes de chaque côté des mains du praticien, d'éliminer les ombres produites naturellement par une seule source de lumière.

La lampe Hydra crée un effet scialysant localisé sans aucune ombre permettant de travailler avec une extrême précision.

Têtes de lampe montées sur deux flexibles positionnables individuellement. Le grand flexible soutenant efficacement l'ensemble apporte la maniabilité nécessaire pour une utilisation confortable.

Idéale en esthétique pour les actes sur le visage et le cuir chevelu, la mésothérapie, les implants capillaire, tatouage...



HYDRA  
Interrupteur On/Off



● Dispositif Medical Classe 1

Intensité Lumineuse ➔ **420 Lumens\* X 2**

Température de couleur ➔ **4500°K\* (blanc neutre)**


Indice de rendu des couleurs ➔ **IRC 95/100**

Consommation électrique ➔ **6,5 Watts**

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 6 x 10 cm
- Bras flexible : 100 cm + 2 x 25 cm

• Fixations à choisir p. 23 - 26

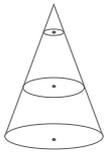

Lux*	Faisceau 25°	Distance	Diamètre éclairé
20000		30 cm	15 cm
7000		50 cm	25 cm
1700		100 cm	35 cm

VALEURS POUR CHAQUE TÊTE

\*Tolérance des données +/- 10%

## RÉFÉRENCES

Interrupteur On/Off	Interrupteur sans contact
LEDBI122	LEDBI122-ISC

