

## DESCRIPTION PRODUIT

Désignation	Alèse bordable à usage unique
Taille (cm)	<b>90 x 180</b>
Référence	<b>14054100</b>
Code EAN-13	3 401 060 223 472
Capacité d'absorption (ml)*	<b>1800 ml</b>
Couleur PE	<b>Blanc</b>
Dimension du matelas (cm)	70 x 54



\* ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%

\*\* Tolérance +/- 5%

## PACKAGING

Nb d'unités / sachet	25
Nb de sachets / carton	4
Nb d'unités / carton	100
Dimensions UVC (mm)	235 x 185 x 300

## DONNEES LOGISTIQUES

Dimensions carton (mm)	598 x 398 x 261
Poids du carton (kg)	10,72
Nb de cartons / palette	32
Hauteur de palette (m)	2,238
Dimension palette (cm)	80 x 120
Compactage	Oui
Site de Production	ROUVROY (62) - France

## COMPOSITION

Voile interne	Voile extra doux, respirant et protecteur :
Origine France/Italie	100% Non-Tissé polypropylène hydrophile Spunbonded
Coussin, tampon ou matelas	Concentration des liquides au cœur du tampon :
Origine USA	- Fluff (pâte à papier - fibres de cellulose)
Voile externe	Voile intraversable de couleur unie :
Origine France et Italie	100% Polyéthylène

## CARACTERISTIQUES

Coussin	Composé de fibres longues de pulpe de cellulose pour une meilleure rétention des liquides
Calandrage	Gaufrage très fin garantissant le maintien du tampon et permettant une diffusion du liquide de manière homogène
Bordable	2 rabats en polyéthylène qui se déploient permettent de border l'alèse sous le matelas




# amd Pad

Alèse à usage unique

Protège vos fauteuils et votre literie

Tampon parfaitement homogène et bords rectilignes

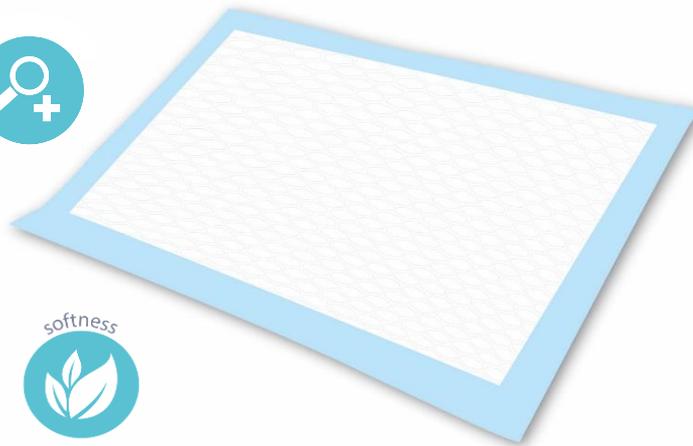

Calandrage plus fin permettant une meilleure diffusion des liquides

Confort optimal avec sa nappe absorbante «toucher soyeux»



## Certifications



Testé dermatologiquement



Soudures ultra-son (pas de colle en contact avec la peau)



Matières premières non irritantes, haute tolérance cutanée pour les peaux les plus sensibles

Sans latex



Certifié ISO 14001, ISO 9001 et PEFC


Un système de management dédié aux enjeux du développement durable



Des matières premières ECO-RESPONSABLES recyclées, choisies pour leur performance technologique au service de nos produits



- Emballage avec poignée de transport
- Ouverture prédécoupée sur le côté
- Emballage recyclable
- Tailles et absorptions (gouttes et couleurs) visible: sur toutes les faces

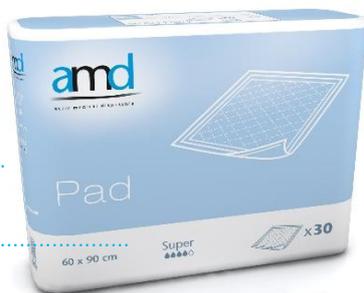

## Gamme complète

60 x 40 cm	<b>extra</b>	●●●●●
60 x 60 cm	<b>extra</b>	●●●●●
60 x 90 cm	<b>extra</b>	●●●●●
60 x 40 cm	<b>super</b>	●●●●●
60 x 60 cm	<b>super</b>	●●●●●
60 x 75 cm	<b>super</b>	●●●●●
60 x 90 cm	<b>super</b>	●●●●●
90 x 180 cm	<b>super</b> bordable	●●●●●