


DESCRIPTION PRODUIT

Désignation	Culottes Absorbantes Pull-Up
Taille	T4 - XLarge
Référence	12045000
Code EAN-13	3 701 116 401 985
Capacité d'absorption ISO (ml)* **	2450 ml
Repère d'absorption	◆◆◆◆
Couleur PE	Blanc
Dimension totale (cm)**	26/34 x 22/40
Tour de Hanche (cm)**	120 - 170

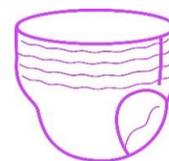

* ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%

** Tolérance +/- 5%

PACKAGING

Nb d'unités / sachet	14
Nb de sachets / carton	6
Nb d'unités / carton	84
Dimensions UVC (mm)	230 x 180 x 285

DONNEES LOGISTIQUES

Dimensions carton (mm)	753 x 283 x 336
Poids du carton (kg)	9,07
Nb de cartons / palette	28
Hauteur de palette (m)	2,5
Dimension palette (cm)	80 x 120
Compactage	Oui
Site de Production	ROUVROY (62) - France

COMPOSITION

Voile interne	Respirant et protecteur :
Origine France et Italie	100% Non-Tissé polypropylène Spunbonded
Coussin, tampon ou matelas	Concentration des liquides au cœur du tampon :
Origine USA	- Fluff (pâte à papier - fibres de cellulose)
Origine France	- SAP Polymère Super Absorbant
Origine Italie	(microbilles anti-odeur en polyacrylate de sodium)
	- Bande d'acquisition hydrophile NT en fibres de polyester Highloft
	(assure la garde au sec)
Voile externe	Sensation coton, doux et discret :
Origine France et Italie	100% Polyéthylène intraversable
	recouvert de non-tissé

CARACTERISTIQUES

Adhésif gris au dos	Indique l'arrière du produit et la taille. Ce tape permet d'enrouler la protection après usage - Origine Turquie
Ceinture élastique	Ceinture en non-tissé extra doux et respirant. Elasticité grâce aux fils de Lycra® croisés sur toute la largeur de la ceinture pour un ajustement optimal. Soudure des côtés à l'ultra-son, sans colle. Peut être déchiré sur les deux côtés après usage - Origine Allemagne
Barrières anti-fuites	Barrières intégrales en non-tissé hydrophobe de chaque côté de la protection pour une utilisation en toute confiance
Fronces à l'entrejambe	Fils de Lycra® soudés à l'ultrason sur les barrières anti-fuites et sur le non-tissé à l'entrejambe - Origine Allemagne
Indicateur d'humidité	Témoin de saturation : sur la face externe de la protection, l'encre Willet de traçabilité s'efface lorsque la protection est saturée - Origine France
Repérage des tailles	2 indicateurs : Inscription standard (S/M/L/XL) sur le voile externe + sur l'adhésif à l'arrière



amd Pant

Sous-vêtement absorbant

Pour plus de liberté, se porte comme un sous-vêtement ordinaire



Voile respirant pour une peau plus saine
Les matières en non-tissé perméable à l'air favorisent la respiration de la peau pour limiter les risques d'irritation



Ajustement parfait grâce à sa double ceinture élastique
Coutures latérales déchirables pour un retrait facile après usage



Barrières anti-fuites intégrales pour une sécurité maximale

Super absorbant disposé au centre du tampon pour retenir odeurs et bactéries



Témoin d'humidité qui s'efface au contact de l'urine
Taille et absorption sur le voile externe de la protection
Adhésif enrouleur avec taille au dos



Absorption rapide et totale grâce à son tampon multi-couches



Testé dermatologiquement



Soudures ultra-son (pas de colle en contact avec la peau)



Matières premières non irritantes, haute tolérance cutanée pour les peaux les plus sensibles

Sans latex



Certifié ISO 14001, ISO 9001 et PEFC

Un système de management dédié aux enjeux du développement durable

Des matières premières ECO-RESPONSABLES recyclées, choisies pour leur performance technologique au service de nos produits



- Emballage avec poignée de transport
- Ouverture prédécoupée sur le côté
- Emballage recyclable
- Tailles et absorptions (gouttes et couleurs) visibles sur toutes les faces



Gamme complète

medium	normal	4 blue droplets	small	super	4 green droplets
large	normal	4 blue droplets	medium	super	4 green droplets
medium	extra	4 yellow droplets	large	super	4 green droplets
large	extra	4 yellow droplets	medium	maxi	4 purple droplets
x-large	extra	4 yellow droplets	large	maxi	4 purple droplets
			x-large	maxi	4 purple droplets