

Welch Allyn Pocket LED

Otoscopes,
Ophthalmoscopes et Sets

Maximisation des performances et de la durabilité dans un ensemble compact qui se transporte facilement avec vous d'un patient à l'autre.



Examinez votre patient avec style

Avec des outils de diagnostics haute performance
de Welch Allyn



4 couleurs différentes :



Onyx



Plum



Vanilla



Blueberry

Personnalisez votre outil avec les accessoires :



Welch Allyn Pocket LED bumper de poignée et de la fenêtre d'Otoscope

Egalement disponible en sets :

Welch Allyn
Pocket LED Sets
avec pochette souple



*Les sets Pocket LED + set est fourni d'origine avec les accessoires des 4 couleurs
l'otoscope Pocket LED + est fourni d'origine avec des bumpers de la couleur de l'otoscope + la couleur blanche
l'ophtalmoscope Pocket LED + est fourni d'origine avec des bumpers de la couleur de l'otoscope + la couleur blanche

Otoscope Welch Allyn Pocket LED

- L'otoscope de poche le plus résistant du marché, basé sur des tests de chute rigoureux par rapport aux principaux concurrents
- Compact, pour vous permettre de traiter vos patients en toute situation
- Otoscope le plus léger de la gamme Welch Allyn pour un meilleur contrôle et confort
- l'éclairage par fibres optiques fourni une lumière froide sans reflets
- L'ampoule LED ne nécessite pas d'être changée (environ 15000 heures de durée de vie)




Ophtalmoscopes Welch Allyn Pocket LED

- Doté de la technologie de lampe LED Surecolor™ de Welch Allyn conçu pour fournir la lumière dont vous avez besoin pour l'examen du fond d'œil
- Le plus léger des ophtalmoscopes Welch Allyn pour une meilleure portabilité et facilité d'utilisation
- Offrant une durabilité incomparable par rapport aux autres ophtalmoscopes du marché, cet outil est conçu pour être un outil fiable dans votre pratique
- L'ampoule LED ne nécessite pas d'être changée (environ 15000 heures de durée de vie)



WELCH ALLYN
SURECOLOR™ LED

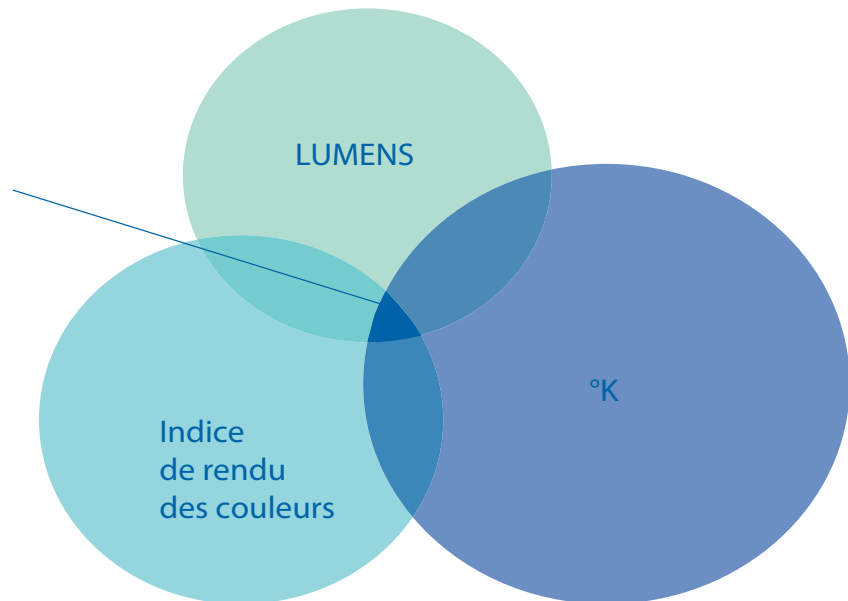

La différence Welch Allyn LED

Avec le bon équilibre entre la température de couleur, l'aspect de la couleur (ou CRI) et la luminosité, nous avons optimisé la technologie LED pour les instruments d'ORL.

Les lampes LED Welch Allyn sont conçues pour durer jusqu'à 20 000 heures

Les lampes LED Welch Allyn vous offrent une vraie couleur des tissus, plus de clarté et une meilleure définition du canal auriculaire et du fond de l'oeil

Le remplacement de l'ampoule n'est pas nécessaire

Welch Allyn

Pocket LED + - Ophthalmoscope

Caractéristiques Produit :



	Pocket LED Ophthalmoscope
Référence	Noir : WEL130, Blanc : WEL131 Mauve : WEL132 , Bleu : WEL133
Hauteur	17.5 cm
Largeur tête	3.0 cm
Profondeur tête	2.8 cm
Diamètre poignée	2.1 cm
Poids tête et poignée	70g
Type Batterie	AA Alkaline x 2
Durée de vie batterie	>5 hrs
Type ampoule	SureColor LED
Durée de vie ampoule	10,000 à 20,000 heures
Efficacité	1.8
PLage dioptre	'-20 to +20
Intervalles dioptre	'-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20
Type filtre	Eliminant le rouge, cobalt bleu
Diaphragmes	5 (Petit, Moyen, Grand, fente, Fixation)
Flux en lumens grand diaphragme	.2 à .45 lumens
Zone d'illumination	11.4 mm à une distance de 50 mm
Contenu	Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum



Couleurs disponibles :
Noir, Bleu, Mauve, Blanc

Welch Allyn Otoscope Pocket LED &

Caractéristiques Produit :



	Otoscope Pocket LED
Référence	Noir : WEL114, Blanc : WEL115 Mauve : WEL116, Bleu : WEL117
Hauteur	16.8 cm
Largeur	3.0 cm
Profondeur	5.1 cm
Diamètre poignée	2.1 cm
Poids (no batteries)	71.7 g
Batteries:	AA Alkaline x 2
Durée de vie batteries:	>5 hrs
Ampoule :	SureColor LED
Durée de vie ampoule :	10,000 à 20,000 heures
Type éclairage	Fibres optiques
Efficience (lumens/watt)	10.3
Agrandissement	3.4X
Dioptre	13.6
Distance d'utilisation	6.5 mm à 4 mm speculum tip
Resolution avec Speculum	3 - 6 lp/mm
Profondeur de champs avec Speculum	0 à 11 mm depuis la pointe du speculum
Distance Focale	73.45 mm
Field of Illumination/Distribution at FO	34.1 mm @ 50 mm distance from tip
Spectroscopie ultraviolet-visible	0%/99.47%/0.53%
Raccord de soufflerie pour test pneumatique	Oui
Intensité	1240 lux avec un speculum de 4 mm
Garantie	3 ans
Contenu	Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum



Couleurs disponible:
Noire, Bleu, Mauve, Blanc