


# Lympha Pro 6 avec paire de bottes - appareil de pressothérapie

## Codes produits :

Référence : 280170

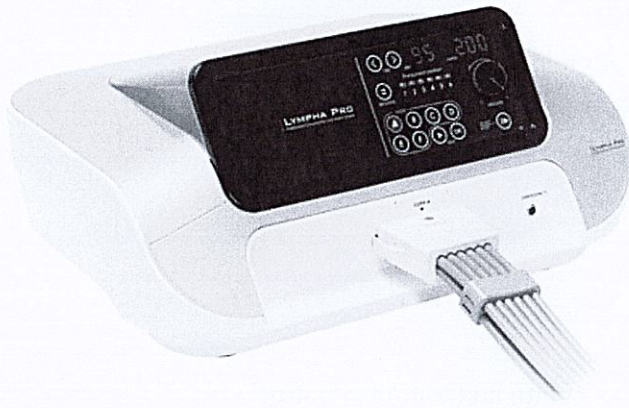

## Caractéristiques du produit :

Nbre de cellules: 6  
Pression: 10 à 200 mmHg  
Nbre de programmes: 6  
Longueur: 41 cm  
Largeur: 31 cm  
Hauteur: 19,4 cm  
Poids: 4,8 kg  
Garantie: 2 ans

## Description brève du produit :

Découvrez la simplicité avec l'appareil de pressothérapie Lympha Pro 6. Doté de 6 cellules par botte, d'un design innovant et de 6 programmes complets, il offre une expérience thérapeutique intuitive et complète. Optez pour l'efficacité alliée à la facilité d'utilisation pour des séances de pressothérapie exceptionnelles.

Livré avec 1 paire de bottes 6 cellules.

## Description du produit :

Le **Lympha Pro 6**, équipé de 6 cellules, redéfinit l'expérience de la pressothérapie professionnelle en reproduisant de manière experte un traitement au plus proche des méthodes manuelles. Avec ses 6 étages et une gamme d'accessoires compatibles (*cf. accessoires disponibles en option*), cet appareil offre une polyvalence exceptionnelle.

Sa simplicité d'utilisation le positionne comme un outil indispensable pour des soins hautement efficaces. Intégrez aisément la puissance de la pressothérapie dans votre pratique, propulsant vos traitements vers de nouveaux sommets de réussite.

Doté d'un design innovant et de 6 programmes complets, le Lympha Pro 6 se distingue comme un choix incontournable pour optimiser les traitements d'œdèmes et de drainages lymphatiques. Sa facilité d'utilisation en fait un instrument essentiel, pour des soins efficaces et professionnels. Faites le choix de l'excellence thérapeutique avec le Lympha Pro 6.

*Nous vous livrons le Lympha Pro 6 accompagné d'une paire de bottes étagées, équipées de 6 cellules chacune.*

Les atouts de l'appareil de pressothérapie Lympha Pro 6

- **6 cellules** : pour une sensation au plus proche du traitement manuel.



- Silencieux, fiable et sans entretien.
- Affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive.
- Système de sécurité (déflation automatique).
- **Fonction SKIP** : permet de mettre une pression nulle sur une ou plusieurs cellules.
- **Fonction REVERSE** : permet de réaliser un appel à résorption.

Les caractéristiques de l'appareil de pressothérapie Lympha Pro 6

- Paire de bottes étagées 6 cellules
- 6 modes de compressions possibles
- Pression réglable : de 10 à 200 mm Hg
- Temps de traitement réglable : de 5 à 95 minutes par pas de 5 minutes
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 31 cm
- Hauteur : 19,4 cm
- Poids : 4,8 kg
- Alimentation : secteur 230V
- Garantie : 2 ans

Les caractéristiques de la botte de pressothérapie Lympha Pro 6

- 6 cellules
- Longueur : 76 cm (du talon au haut de la botte) / 96 cm (de la pointe au haut de la botte)
- Circonférence (haut de la botte) : 68 cm
- Circonférence (bas de la botte) : 41 cm

Le Lympha Pro 6 est livré avec :

- 1 paire de bottes standards à 6 cellules (*Cf caractéristiques ci-dessous*).
- 1 poire d'arrêt d'urgence avec câble extensible
- Son manuel d'utilisation

Option : Élargisseurs de Bottes pour Lympha Pro 6

Améliorez le bien-être de vos patients en personnalisant la pressothérapie selon leurs besoins

Les élargisseurs de bottes pour Lympha Pro 6 sont conçus pour assurer un ajustement adapté aux patients avec un tour de cuisse plus large. Obtenez une **circonférence supplémentaire de 10 cm sur le haut de la botte**, et ne vous souciez plus d'une taille de botte inadaptée à certains patients. Pour une expérience de pressothérapie sans compromis.

Ce module s'installe facilement sur les bottes existantes grâce à une fermeture à glissière pratique.

Autres accessoires en option

Explorez des possibilités étendues pour une expérience de pressothérapie encore plus complète avec les accessoires optionnels pour l'appareil Lympha Pro 6 :

**Attributs du produit :**