

## C45



Code article : **1030005S1** (C45 gauche)  
**1030005S2** (C45 droite)

Code GTIN : 3615800000753 (C45 gauche)  
3615800000760 (C45 droite)

Famille :  
**Cannes métalliques**

Description :  
**Canne de malade aluminium, poignée anatomique droite ou gauche, finition anodisée**

Usage revendiqué :  
Les cannes métal sont des aides à la marche manipulées avec un bras.  
Leur utilisation est intérieure ou extérieure

Classe du dispositif : 1 (non invasif)

Garantie produit :  
2 ans contre tout vice de fabrication

Remboursement LPPR : 1296787  
(Canne métallique avec appui antébrachial ou poignée en T)



### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm)

- Hauteur mini\* : 800 mm
- Hauteur maxi\* : 975 mm

\* position médiane sur poignée – tolérance ± 5mm

#### Description technique

- Mât : tube alu Ø 20 x 1 (roulé soudé - 5086)  
8 positions (tous les 25mm)
- Rallonge basse : tube alu Ø 17,2 x 1 (roulé soudé - 5086)
- Bague anti-jeu Ø 20 noire entre mât et rallonge
- Poignée anatomique en PP noir fixée avec rivet alu  
→ au choix : poignée anatomique droite ou gauche
- Blocage du réglage en hauteur: cliquet simple Ø 6 mm
- Embout Ø 18 anti-bruit
- Embout 17x35 noir
- Finition : anodisée

Poids du produit :

**0,265 kg**

Date de 1ère mise sur le marché :

**Mai 2004**

### Etiquetage produit


Vignette CE



**C45**



Liste des pièces :

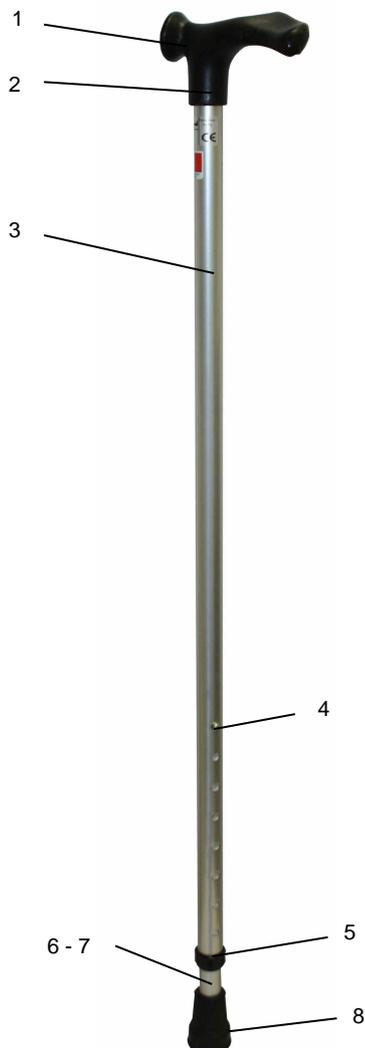

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000070	1	Poignée anatomique droite (version C45 droite)
1	A000071	1	Poignée anatomique gauche (version C45 gauche)
2	A001012	1	Rivet diam. 4/10 noir alu
3	E103000	1	Mât canne malade ano Lg 700
4	A001053	1	Cliquet simple de 6
5	A000003	1	Bague diam. 20 noire
6	E103001	1	Rallonge canne malade ano lg 455
7	A000035	1	Embout diam. 18 int
8	A000206	1	Embout 17x35 noir

Edition 6 - juin 2017



Siège social :  
 Parc Eurasanté - 243, Rue Allendé  
 59120 LOOS LEZ LILLE  
 Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50  
 Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse  
 B.P. 212  
 24102 BERGERAC Cedex  
 Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50  
 Fax : +33 (0)5 53 63 06 07