



# PROFIL' AIR

## Coussin d'assise

Coussin à air à cellules télescopiques individuellement déformables

**2 versions :**

Monocompartiment et Bicompartiment,

**2 hauteurs :**

5 et 7cm

Plot innovant en forme de fleur pour favoriser la circulation d'air

L'indépendance et l'élasticité des cellules permettent de réduire les forces de frottement et de cisaillement

Housse de protection (en polyamide élasthanne) élastique dans les 2 sens pour suivre les déformations des cellules. Revêtement antidérapant limitant les glissements du coussin par rapport au fauteuil

- *Technologie R-SOFT*
- *Réglages simples*
- *Stabilité et souplesse*



### INDICATIONS :

Support de fauteuil d'aide à la prévention de l'escarre Catégorie 3

Patients à risque élevé à très élevé d'escarre ischiatique ou présentant une escarre de stade 1 (présence d'érythème) dont le poids

est supérieur à 35kg ou inférieur à 120kg, sans trouble de la stabilité (monocompartiment) et avec trouble de la stabilité (bicompartiment) Patients restant sur un fauteuil près de 8 à 10 heures par jour




## DONNÉES TECHNIQUES

Références	Dimensions : Largeur x Profondeur x Hauteur en cm	Mono ou Bi-compartiments
REC-CPA002	40x40x5cm	Mono-Compartment
REC-CPA003	40 x 45 x 5 cm	Mono-Compartment
REC-CPA004	45x45x5 cm	Mono-Compartment
REC-CPA005	40 x 40 x 7 cm	Mono-Compartment
REC-CPA006	40 x45 x 7 cm	Mono-Compartment
REC-CPA007	45 x 45x 7 cm	Mono-Compartment
REC-CPA008	40 x40x 7 cm	Bi-Compartment
REC-CPA009	40 x 45 x 7 cm	Bi-Compartment
REC-CPA010	45 x 45 x 7 cm	Bi-Compartment

AVIS DE LA CNEDIMTS 28 MAI 2013



Le manomètre dispose d'une échelle de mesure avec code couleur pour simplifier les réglages de pression

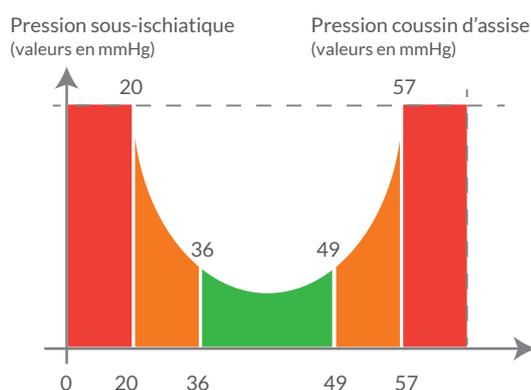

### CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

PROFILAIR / version 02.09.2016 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE - certification CE selon la directive 93/42/CEE du 14.06.93 modifiée par la directive 2007/47/CE. Photos non contractuelles »

Photos non contractuelles



ISO Cert. 6025199



RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX

T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94

RECFRANCE SAS - Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020

administration@recfrance.com - www.recfrance.com