

SLIMFIT



Pour le soin du corps et de votre beauté, pour la santé et le sport. Le drainage avec les Serial Sequential Stimulation est la nouveauté absolue de cette nouvelle gamme de produits

136 programmes

22 Sport – 32 Fitness – 60 Beauté - 12 Douleur-Tens – 3 Rehab
1 Incontinence – 6 Serial Sequential Stimulation "3S"

TECHONOLOGIES A L'AVANT-GARDE DANS LA NOUVELLE GAMME 2013

Globus présente une technologie d'innovation destinée à révolutionner l'utilisation de l'électrostimulation dans le domaine esthétique, sportif et médical: la technologie 3S (Serial Sequential Stimulation)

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S": La contraction séquentielle des différents secteurs musculaires produit une onde de pression profonde dans la musculature intéressée qui entraîne le drainage des liquides interstitiels et qui favorise le retour du sang veineux au cœur.

MULTI-UTILISATEUR: possibilité de mémoriser jusqu'à 3 utilisateurs différents et de créer une bibliothèque de programmes personnalisés en fonction des objectifs individuels.

SYNCROSTIM: il est possible d'augmenter l'intensité des 4 canaux simultanément.

PROGRAMMES PREFERES : possibilité de mémoriser jusqu'à 5 programmes par utilisateur.

LAST 10: il mémorise les 10 derniers programmes effectués.


WORK TIME: il signale le temps total d'utilisation de l'appareil

MY TRAINER: il visualise le positionnement des électrodes sur l'écran

FITNESS ET FORME PSHYSIQUE: Un corps vif et toujours en forme est une condition essentielle pour mener une vie dynamique et pleine d'énergie. Avec SlimFit vous avez une salle de gym personnelle: vous pourrez effectuer tous les programmes de raffermissement et de tonification nécessaires à développer un physique parfait et efficace, capable de vous assurer la force et l'énergie que vous désirez.

CORPS ET BEAUTE: Avec une dotation complète de programmes professionnels comprenant lipolyse, drainage, tonification, modelage, lifting et massage, Globus SlimFit valorise l'harmonie de votre corps et vous aide à exprimer votre beauté et votre charme.

SANTE ET BIEN-ETRE: Les maux de dos, les douleurs cervicales, la sciatalgie, les douleurs articulaires nous accablent et nous démoralisent souvent. Les courants TENS, endorphiniques, constants et modulés, suppriment la douleur et nous rendent la santé, le bien-être et le plaisir de vivre jour après jour.

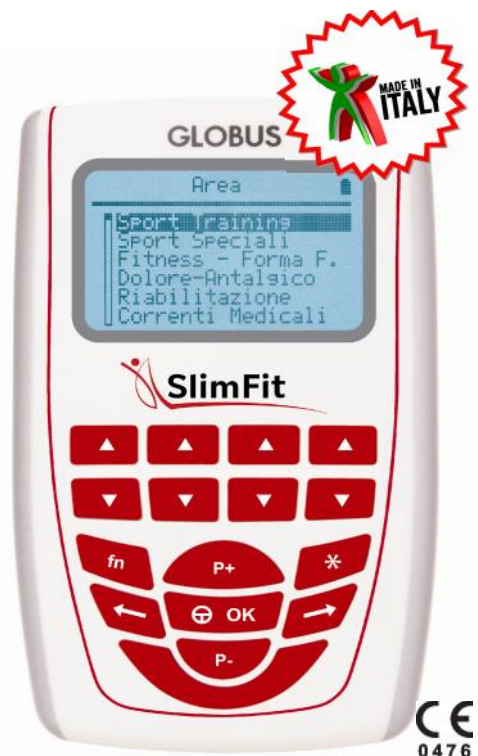

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Canaux: 4 CANAUX indépendants 0,3 – 150 Hz
Puissance: 120mA par canal
Largeur d'impulsion: 40 – 450 µs
Forme d'onde: Onde carrée, biphasique, symétrique, compensée
Alimentation : batterie rechargeable
Dispositif en classe II A
Ecran rétro-illuminé
Conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE

EQUIPEMENT

1 Sacoche de transport
1 Stimulateur SlimFit
4 Câbles pour connecter les électrodes.
4 Électrodes autocollantes carrées
4 Électrodes autocollantes rectangulaires
1 Alimentateur
1 Manuel d'utilisation

SLIMFIT

Liste Programmes

Sport

Capillarisation
Echauffement
Échauffement
Ech. Pre-compétit.
Récupération active
Force Maximale
Force Résistante
Force Explosive
Réactivité
Récupération post-compétition
Hypertrophie

Fitness

Raffermissment
Modelage
Modelage Bio-Pulse
Capillarisation visage
Augmentation masse
Jogging

Beauté

Drainage
Drainage Bio-Pulse
Lipolyse
Massage Relax B-P
Massage tonifiant
Massage Energétique
Massage Connective
Bras Gonflés
Capillarisation du visage
Définition
Ligne
Amélioration du ton de la peau
Drainage post-accouchement
Lipol. post-Accouch.
Raffermissment post-accouchement
Raffermissment du sein
Modelage du sein

TENS

Tens Antalgique Conventionnelle
Douleurs menstruelles
Tens Antalgique modulée
Ostéarthrite de la main
Tens des endorphines
Douleur chronique
Douleur à l'épaule (syndrome scapulo-humérale)
Douleur musculaire
Lombalgie chronique
Douleurs cervicales
Bursites - Tendinites
Ostéoarthrite

Rehab

Atrophie du quadriceps (avec prothèse au genou)
Rétablissement post-intervention LCA
Prévention Subluxation de l'Epaule

Incontinence

Incontinence mixte

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S"

La liste des programmes "3S" comprend 6 combinaisons de paramètres

Modalité	Hz	Amplitude	Temps de Retard (sec)
3S 0,5 sec	55	300	0,5
3S 1 sec			1
3S 2 sec			2
3S 3 sec			3
3S 4 sec			4
3S sériel			11
TOTAL	6 programmes		

Les programmes de "3S" se caractérisent par un retard d'activation des canaux 3 et 4 par rapport aux canaux 1 et 2. La Serial Sequential Stimulation permet de stimuler la musculature en chaîne cinétique grâce aux différents temps d'activation des zones musculaires intéressées. Lorsqu'on parle de "temps de retard" on se réfère aux secondes de retard avant l'émission de l'impulsion successive.